



Tech Love Smart Neck Pro

TL103A

製品紹介


● 付属品

- ① 製品本体X1 ② USB充電コードX1 ③ 取扱説明書（保証書付き）X1

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更する場合がございます。

※本製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。

● 製品紹介

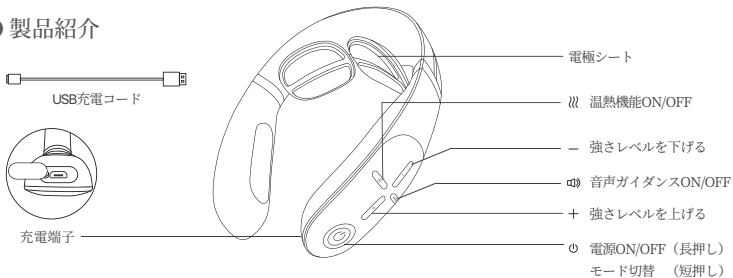

安全上のご注意必ずお守りください

● 注意事項

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。万一、異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、お客様相談センターへお問い合わせください。本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。



警告

次のような機器とは、絶対に併用しないでください。

- ① ベースメーカーなどの体内植込み型機器
- ② 人工心肺などの生命維持用の機器
- ③ 心電計などの装着型機器



安全上のご注意必ずお守りください



警告

- ❗ 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を使用する際には、頸部および頭部の金属、アクセサリー類を外して使用してください。強いショックを受ける恐れがあります。
- ❗ 連続使用時間は15分を超えないでください。長い時間の使用により、低温やけどや肌のトラブルの原因になります。
- ❗ 本製品を分解、改造しないでください。故障や事故の原因になります。
- ❗ ご使用中に体の不調や肌のトラブルが起きた場合には、直ちにご使用を中止し、医師にご相談してください。
- ❗ 使用中に本体の位置を変える場合は、まず電源をオフにしてから位置を変えてください。強いショックを受ける恐れがあります。
- ❗ お風呂など、高温多湿の場所では使用しないでください。強いショックや故障の原因となります。
- ❗ 急に動作が停止した場合は、直ちに電源を切って、首から外してください。すぐに、販売店までにご連絡ください。

安全上のご注意必ずお守りください



警告

- ❗ 本体からUSB充電コードを外す際には、コードの先端を固定してから、外してください。
- ❗ 本体およびUSB充電コードを水につけたり、水洗いしないでください。感電やショートによる火災などの原因になります。
- ❗ USB充電コードが傷んだり、差込口がゆるいときは使用しないでください。USBコードを破損加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものを乗せ無理な扱いをしたり、はさんだりしないでください。感電やショートによる火災などの原因になります。
- ❗ 不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を落としたり、ぶついたりしないでください。けがや本体が故障する原因となります。
- ❗ 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止してください。破損・発火の原因になります。
- ❗ USB充電コード本体の差込口部分に液体、金属類、異物、ほこりを付着させないでください。感電やショートの原因になります。

安全上のご注意必ずお守りください



警告

- ⊗ 運転中、睡眠時、飲酒後には使用しないでください。思いがけない事故やけがにつながる恐れがあります。車内でのご使用は、休憩中など運転中以外でご使用ください。
- ⊗ 就寝時に、本製品を使用しないでください。
- ⊗ 使用しないときは必ず電源を切り、長時間の加熱を避けてください。火災・故障の原因になります。
- ⊗ ドライヤーやファンヒーターなどで、本体や付属品を乾燥しないでください。部品の変形、故障の原因になります。
- ⊗ 収納時にUSB充電コードを本体などに巻き付けしないでください。コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
- ⊗ USB充電コードは付属品を使用してください。また、他の製品には使用しないでください。故障や事故の原因になります。

安全上のご注意必ずお守りください



警告

● 次の人、及び次の場合は使用をお控えください

次の人は当製品を使用しないでください





- 1 悪性腫瘍のある方
- 2 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 3 自らの意思表示、伝達ができない方
- 4 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性の皮膚炎、敏感肌の方
- 5 薬を服用中の方
- 6 発熱が（38℃以上）している方
- 7 乳幼児、お年寄りのなど、熱さを自覚できない方
- 8 糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 9 肌に傷や湿疹、腫れものがある方
- 10 首や頸椎の病気のある方またはあった方
- 11 体調不良や身体に異常を感じている方
- 12 心臓疾患のある方、血栓のある方
- 13 医療機関で治療中の方
- 14 首や頸椎の病気のある方、またはあった方
- 15 むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性痛のある方
- 16 安静を必要とする方、体調不良、体に異常を感じている方
- 17 骨折、整形などで、顔面や首、頸椎に埋め込み手術を受けた方
- 18 性感染症のある方
- 19 妊娠中の方、出産直後の方（医師にご相談の上ご使用ください）
- 20 首や頸椎の手術を行った方
- 21 脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）
- 22 医師からマッサージを禁じられている方

製品機能・注意事項

● 製品機能



● 充電時の注意事項

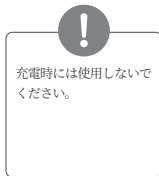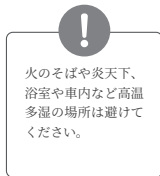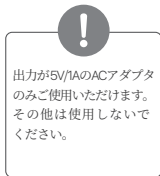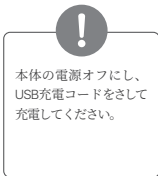



ご使用方法

● 使用前の準備

ご使用前に、水かオイルで首元を濡らしてからご使用ください。



● 操作方法

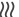- ① 「電源・モード切替」ボタンを長押しして起動します。初期設定の強さレベルは「0」となります。稼働中「電源・モード切替」ボタンを長押しで、電源をオフにすることができます。
- ② 「電源・モード切替」ボタンを短押ししてモードを切り替えることができます。モードは4種類があります。モードを切り替えると強さレベルが「0」に戻ります。
- ③ 「+」ボタンを短押しして、強さを上げることができます。
- ④ 「-」ボタンを短押しして、強さレベルを下げるすることができます。
- ⑤ 「」は温熱機能ボタンです。短押しで、温熱機能ON・OFFに切り替えることができます。
- ⑥ 「」は音声ガイダンスボタンとなります。本体の電源をONにすると音声ガイダンスが自動的に流れます。短押しで音声ガイダンスをON・OFFに切り替えることができます。
- ⑦ 15分間の自動電源OFF機能がついております。また、本体を首元にしっかり密着させてください。肌に密着していない場合は、60秒で電源が自動的にOFFになります。
- ⑧ 首元に密着させ、本体の稼働の状態から外すと電源が自動的にOFFになります。
- ⑨ 電池残量が少ない場合、電源ボタンは青から赤に変わります。出力5V/1AのUSBケーブルを使用して、充電してください。

お手入れ

● 手入れ・保管方法

- 1 本製品を使用しないときは、製品を安全なところに保管し、製品の上に物を載せないでください。
- 2 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 3 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 4 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿な場所を避けて、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 5 腐食性のある洗剤で掃除しないで下さい(褪色、ヒビが入る原因となる為)。
- 6 当製品を他の目的で使用しないで下さい。
- 7 長期間本製品を使用しない場合は、本体をフル充電してから保管してください。
また、定期的に本製品を動作させ、再度充電してください。

お手入れ

● お手入れ方法

- 1、本体は清潔に保ってご使用下さい。破損や汚染の原因となります。
- 2、お手入れする前に、必ず電源を切って下さい。
- 3、柔らかい布や柔らかいスポンジを使って拭き取って下さい。製品は濡れないようにして下さい。
- 4、お手入れする際、水や他の液体を製品に浸透しないで下さい。感電や短絡（ショート）の恐れがあります。
- 5、家具用研磨剤、ブラシ、ガソリン、灯油、ガラス、または腐食の危険がある洗剤は使用しないでください。

充電電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。
(電池寿命は、使用、保管などにより変化します。充放電可能回数の目安は300回~500回です。)
- 電池は交換には対応していません。
- 期間使用しないときは、本体を振る充電してから保管します。また、一ヶ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

当製品の包装は、お住いの地域ごみ分別ルールに従って出してください。
製品を廃棄するとき、自分で分解しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



製品仕様

製品名称	Tech Love Smart Neck Pro
品番	TL103A
発売元	極楽鳥製薬株式会社
定格電源	5V \equiv 1A
定格電圧	3.7V \equiv
消費電力	5W
電池容量	1000mAh
稼働時間	15min/回
正味重量	約159g
サイズ	約160×131×42mm
バージョン番号	J-02

※ サイズ、重量などの数値は参考値であり、実際の数値は実物に準じます。

※ 本製品は、医療機器ではありません

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

本書は、再発行しませんので、大切に保管してください。

無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご用意のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

所定の記入欄が空白のままですと本書は有効にはなりません。記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

正規代理店以外（転売業者等）から購入した場合は、使用状況、保管環境が不明のため、保証対象外となります。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理若しくは交換いたします。
2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
3. 保証期間内であっても次のような場合は、有料修理となります。
 - ①使用上の誤りまたは不当な修理・改造による故障や破損。
 - ②お買い上げ後の落下・衝突などによる故障や破損。
 - ③地震、火災、ガス害、風水害、その他天災による故障や破損。
 - ④外力による本体の変形や変色。
 - ⑤消耗品の消耗による交換。
4. 点検・修理等の依頼の際の送料は、お客様負担とする。

保証書

製品名称／品番	Tech Love Smart Neck Pro TL103A
無料修理保証期間	お買い上げ日 年 月 日 より12ヶ月間

お客様

お名前:

ご住所:

お電話番号:

製品に対するお問合せ先

発売元・住所・TEL

極楽鳥製薬株式会社

東京都足立区千住宮元町12-12

TEL.03-6822-3536

お問合せ受付時間 : 10:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

取扱販売店 住所・電話番号

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます

SINCERELY THANK YOU FOR CHOOSING

取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管してください

Please read the manual carefully before using and properly keep for later queries