

BEBIRD PRO



USER MANUAL

BEBIRD Pro Cares For You More

Model: T15 PRO

Official Website: bebird-pro.com

CONTENT

1. ENGLISH	03-07
2. Deutsch	08-12
3. Français	13-17
4. Italiano	18-22
5. Español	23-27
6. 日本語	28-32

ENGLISH

Thank you for your purchase on Bebird pro!

We are committed to providing the best products to our customers, and all Bebird pro products meet strict standards for manufacturing, performance, and safety.

We are also committed to providing the best customer service to ensure customer 100% satisfaction, and we offer one year warranty to protect customer rights.

If you need after-sales service or other product consultation, you can contact us in the following ways.

Precautions Before Use



Attention:

1. When cleaning lens, please wipe it carefully with professional alcohol cotton swab.
2. Make sure the ear spoon is assembled in place before using to prevent falling off.
3. Please don't use it while you are moving, and protect yourself from being hit by others.
4. It is forbidden for children to use this product alone to avoid accidental harm.
5. Please do not put the product in liquid to avoid damage.
6. Product built-in polymer battery, so it must be charged once a month if it is not used frequently.
7. Avoid product exposure to sunshine directly, especially the accessories, in order to avoid softening.
8. During using it, the temperature of the product will rise slightly(Data from bebird pro lab, the maximum temperature of the machine doesn't exceed about 45°C), please rest assured to use.




Disclaimer

Bebird pro does not guarantee its goods against any defect or damage caused by transportation, storage, improper installation and maintenance, internal or external hostile environments, misuse, abuse, negligence, accident, modification, tampering, the attachment of unauthorized accessory, alteration to the goods, poor workmanship, or any other conditions whatsoever that cause a defect or failure of the product.

Product Parts Introduction

Brand:	Bebird pro
Product Name:	Smart Visual Ear-Clean Rod
Mode:	T15 PRO
Rod Weight:	25g
Network Standard:	IEEE802.11b/g/n
Antenna:	Internal FPC antenna
Working Frequency:	2.4Ghz
Image Transmission Rate:	20fps
Image Sensor:	CMOS
Working Temperature:	14-113°F
Battery:	300mAh lithium battery
Using time after fully charged:	85 minutes
Charging time:	85 minutes
Input Voltage:	DC 5V 0.5A
Lens Diameter:	3.5mm
Depth of Field:	10~50mm
Pixel:	5M
Gyroscope:	3 axis
Waterproof:	only the lens is waterproof

Product Parts Introduction

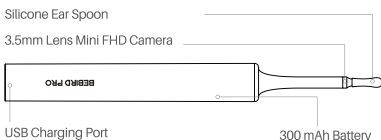

EAR PICK ACCESSORIES

Advanced Cleaning Set:

- Silicone covered metal ear spoon(s) *2
- Silicone covered metal ear spoon(l) *1
- Double color ear spoon(s) *2
- Double color ear spoon(l) *2
- Double color ear spoon(r) *2
- Sponge ear spoon *3
- New ear spoon storage bucket(s) *2

Basic Examination Kit:

- Ear canal observation tool *1
- The cover of ear canal observation tool *10

Operation Guidelines

How to connect APP and use it?



1

Scan QR code to download APP.
(you can also download APP from
our official website:
www.bebird-pro.com)



2

Open bebird pro and
select T15 Pro



3

Open the lid of the product and it
will power on automatically, and
let your phone connect product
WiFi "bebirdpro-XXXX"



4

Back to bebird pro and
click on "Start" to use it

Replace ear spoon



Rotate the old ear spoon counterclockwise to
remove the old ear spoon. Align the top of the
cleaning rod with the new ear spoon, then turn
the new ear spoon clockwise to tighten it.
Please make sure the ear spoon is assembled
in place before using it to prevent falling off.

Truoble Shooting

Question 1: The product body heats up during use

Answer: The product lens is equipped with an LED light, which is not dazzling or glare. And the product adopts a dual temperature control system. During use, the otoscope part has a non-sensing temperature of 25° and the body part's palm temperature is 32°. Therefore, It is a normal phenomenon that the product occurs with slight heat during the operation. The product is safe, so you can use it with confidence.

Question 2: APP display abnormally (lens blur/fuzzy/black screen)

Answer: Uninstall the APP and reinstall, ,confirm that the right machine model has been choosed on APP. Wipe the lens of the product with an dry swab to check whether the lens is damaged.

Question 3: Why does the lens blur after washing? (Propaganda ip67 waterproof)

Answer: Waterproof IP67 refers to splash-proof. It is not recommended to wash with water directly. If the lens enters the water, . Please note that only the lens is waterproof.

Question 4: The WiFi connection is unstable, and the connection will be automatically disconnected from time to time

Answer: The WiFi of products is limited to the use of the product and cannot access the Internet. When It prompts connected but unable to access the Internet, whether to switch, please click "No"; if the WiFi coverage area is strong and the signal of the product is affected by the WiFi coverage, it is recommended to change the environment and try.

Question 5: After using it for a few months, the APP shows that it is not connected after connecting to WiFi (there is no problem with the previous connection)

Answer: Re-download the APP and try to connect and use it.

Warranty

All Bebird pro products are under Bebird pro's warranty for **ONE Year** after the date of the original purchase. Bebird pro recommends using genuine products and accessories purchased from our brand for optimal performance. Using other brush heads may damage your ear scoop and limit your warranty coverage. Contact our after-sales email: cs@bebird-pro.com

Warranty Exclusions

What is not covered by the warranty?

- Use of unauthorized parts or wrong use of the ear cleaning tool.
- Use of the brush head due to misuse, abuse, neglect, alteration, or unauthorized repairs.
- Normal wear and tear, including debris, scratches, scuffs discoloration or fading.

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für Bebird pro entschieden haben!

Wir sind bestrebt, die besten Produkte für unsere Kunden zu liefern. Alle Produkte von Bebird pro erfüllen strenge Standards für die Herstellung, Leistung und Sicherheit.

Wir sind auch verpflichtet, den besten Kundenservice zu bieten, um eine 100% Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Darüber hinaus bieten wir eine einjährige Garantie über unsere Produkte.

Wenn Sie Kundendienst oder andere Produktberatung brauchen, bitte kontaktieren Sie uns auf folgende Weise.

Hinweise vor dem Gebrauch



Wichtige Hinweise

1. Beim Reinigen der Linse bitte wischen Sie es sorgfältig mit einem professionellen Alkoholtupfer.
2. Stellen Sie bitte sicher, dass der Ohrhörer vor dem Gebrauch an Ort und Stelle zusammengesetzt ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.
Bitte benutzen Sie es während des Bewegens nicht.
3. Vermeiden Sie Zusammenstöße mit anderen.
Kinder dürfen dieses Produkt nicht alleine benutzen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
4. Bitte legen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeit, da dies zu Schäden führen kann.
5. Das Produkt hat einen eingebauten Polymer-Akku, der bei seltenem Gebrauch einmal im Monat aufgeladen werden muss.
6. Setzen Sie das Produkt, insbesondere das Zubehör, nicht dem direkten Sonnenlicht aus, da es sonst aufweichen.
Während des Gebrauchs könnte die Temperatur des Produkts leicht ansteigen (laut Labordaten von Bebird pro übersteigt die maximale Temperatur des Geräts nicht 45 °C). Bitte verwenden Sie es ohne Bedenken.
During using it, the temperature of the product will rise slightly(Data from bebird pro lab, the maximum temperature of the machine doesn't exceed about 45°C), please rest assured to use.
- 7.
- 8.




Haftungsausschluss

BEBIRD PRO übernimmt keine Garantie für seine Waren gegen Mängeln oder Schäden, die durch unsachgemäße Transport, Lagerung, Installation und Wartung, interne oder externe feindliche Umgebungen, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfälle, Modifikationen, Manipulationen, das Anbringen von nicht genehmigtem Zubehör, Änderungen an den Waren, mangelhafte Verarbeitung oder andere Bedingungen, die zu einem Defekt oder Ausfall des Produkts führen, verursacht werden. BEBIRD PRO ist im Rahmen dieser Garantie nur für die Reparatur oder den Ersatz von Waren verantwortlich, die während der Garantiezeit ausfallen, vorausgesetzt, der Käufer hat BEBIRD PRO diesen Ausfall unverzüglich schriftlich gemeldet und die Bestimmungen dieser Garantie eingehalten.

Spezifikationen

Marke:	Bebird pro
Produktname:	Intelligenter Visueller Ohrenreiniger
Mode:	T15 PRO
Gewicht des Hauptkörpers:	25g
Netzwerk-Standard:	IEEE 802.11b/g/n
Antenne:	Eingebaute FPC-Antenne
Betriebsfrequenz:	2.4Ghz
Bildübertragungsrate:	20 fps
Bildsensor:	CMOS
Betriebsumgebungstemperatur:	14-113°F
Akku:	300 mAh Lithium-Batterie
Akkulaufzeit:	85 Minuten
Aufladezeit:	85 Minuten
Eingangsstrom:	DC 5V 0.5A
Lensendurchmesser:	3.5mm
Schärfentiefe:	10 ~ 50 mm
Pixel:	5M
Gyroskop:	3 Achsen
Wasserdicht:	nur das Objektiv ist wasserdicht

Lieferumfang

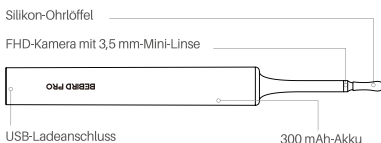

Ohröffel-Zubehör umfasst:

Premium-Reinigungsset:

Silikonüberzogener Metall-Ohröffel(s) * 2

Silikonüberzogener Metall-Ohröffel(l) * 1

Zweifarbige Ohröffel(s) * 2

Zweifarbige Ohröffel(l) * 2

Two Coloured Ear Spoon(r) * 2

Schwamm-Ohröffel * 3

Aufbewahrungsboxen für Ohröffel(s) * 2

Basis-Inspektionsset:

Gehörgang-Beobachtungsdeckel * 1

Gehörgang-Beobachtungsdeckel * 10

Betriebsanweisung

Wie kann ich mich mit der App verbinden und sie nutzen?



1

QC-Code scannen und APP herunterladen (Sie können die APP auch von unserer offiziellen Webseite herunterladen: bebird-pro.com).



2

APP „Bebird pro“ öffnen und T15 Pro wählen.



3

PÖffnen Sie den Deckel des Produkts und es wird automatisch eingeschaltet. Ihr Handy mit WiFi „bebirdpro-XXXX“ verbinden.



4

Zurück zu Bebird pro und zum Verwenden „Start“ antippen.

Ohrstöpsel ersetzen



Drehen Sie den alten Ohrlöffel gegen den Uhrzeigersinn, um den alten Ohrlöffel zu entfernen. Richten Sie den Reinigungsstab und den neuen Ohrlöffel aus und drehen Sie dann den neuen Ohrlöffel im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ohrlöffel vor der Verwendung montiert ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Fehlerbehebung

Fragen 1: Das Produkt erwärmt sich während des Gebrauchs

Antwort: Die Linse des Produkts hat eine LED-Kaltlichtlampe, die nicht blendet oder grell ist. Das Produkt verfügt über ein duales Temperaturkontrollsystem. Während des Gebrauchs hat das Otoskop eine nicht-empfindliche Temperatur von 25 °C und die Temperatur des Körpers beträgt 32 °C. Dies ist ein normales Phänomen, wenn das Produkt während des Betriebs eine leichte Erwärmung auftritt. Die Qualität ist sicher und es kann mit Vertrauen verwendet werden.

Fragen 2: Ausnahme bei der APP-Anzeige (Linse unscharf/ Bildschirm verschwommen/ schwarzer Bildschirm)

Antwort: Deinstallieren Sie die APP und installieren Sie sie erneut. Stellen Sie sicher, dass das Modell über die richtige APP verfügt. Wischen Sie die Linse des Geräts mit einem trockenen Tupfer ab und prüfen Sie, ob die Linse beschädigt ist. (Alkoholtupfer ist nicht empfohlen)

Fragen 3: Linse nach dem Waschen unscharf?

Antwort: Wasserdicht bezieht sich auf spritzwassergeschützt. Es wird nicht empfohlen, die Linse direkt mit Wasser zu abspülen. Wenn die Linse ins Wasser gelangt, bitte lassen Sie sie an einem gut belüfteten Ort trocknen, damit die Feuchtigkeit abziehen kann. Bitte beachten Sie, dass nur das Objektiv wasserdicht ist.

Fragen 4: Die WiFi-Verbindung instabil und oft automatisch unterbrochen

Antwort: Das WiFi der Bebird-Produkte ist auf die Verwendung des Produkts beschränkt und kann nicht auf das Internet zugreifen. Klicken Sie auf „Nein“, wenn Sie gefragt werden „Verbunden, aber kein Internetzugang, möchten Sie wechseln?“. Wenn der WiFi-Abdeckungsbereich ein starkes Signal aufweist und somit die Nutzung von WiFi des Produkts beeinträchtigt wird, wird empfohlen, eine andere Nutzungsumgebung zu versuchen.

Fragen 5: Nach einigen Monaten der Nutzung zeigt die APP nach dem Verbinden mit dem WiFi keine Verbindung an (vorher hatte die Verbindung kein Problem)

Antwort: Laden Sie die App erneut herunter und stellen Sie die Verbindung wieder her.

Garantie & Support

Für alle Produkte von Bebird pro gilt eine einjährige Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum.

Es wird empfohlen, das Originalprodukt und -zubehör von Bebird pro zu benutzen, um die beste Leistung zu erzielen.

Die Verwendung anderer Ohrstöpsel kann Ihren Ohrenreiniger beschädigen und Ihre Garantie einschränken.

E-Mail von Kundendienst: cs@bebird-pro.com

Fehlerbehebung

Was ist nicht von der Garantie abgedeckt?

- Verwendung von unbefugten Ersatzteilen und Ohrstöpseln.
- Reparaturen wegen Missbrauch, Fahrlässigkeit und Modifikation des Produkts, oder unbefugte Reparatur.
- Normaler Verschleiß, einschließlich Verschmutzungen, Kratzer, Schrammen, Verfärbungen oder Verblassen.

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté notre produit Bebird pro!

Nous nous engageons à fournir à nos clients les meilleurs produits, tous les produits Bebird pro répondent à des normes strictes de fabrication, de performance et de sécurité.

Nous nous engageons également à fournir à nos clients les meilleurs services et assurer que la satisfaction du client est à 100% fournir une garantie d'un an pour protéger les avantages du client.

Si vous avez besoin de service après-vente ou d'autre consultation sur le produit, vous pouvez nous contacter par les moyens ci-dessus.

A savoir avant de l'utilisation



Attention:

1. Veuillez utiliser les cotons-tiges professionnels à l'alcool pour essuyer soigneusement les lentilles.
2. Assurez-vous que la cure oreille est assemblée en place avant utilisation pour éviter les chutes.
3. Ne pas déplacer pendant utilisation de ce produit pour éviter d'être frappé par les autres.
4. Il est interdit d'utiliser ce produit par des enfants pour éviter les blessures accidentelles.
5. Ne pas mettre ce produit dans le liquide pour éviter les dommages.
6. Le produit dispose d'une batterie polymère intégrée qui doit être rechargée une fois par mois si elle n'est pas utilisée fréquemment.
7. Éviter l'exposition directement du produit au soleil pour éviter l'adoucissement, surtout les accessoires.
8. Pendant l'utilisation, la température de produit peut augmenter légèrement (Selon les données de laboratoire bebird pro, la température maximale de la machine ne dépasse pas environ 45°C), vous pouvez l'utiliser en toute confiance.




Avis de non-responsabilité

BEBIRD PRO ne garantit pas que les appareils sont exempts de défauts ou de dommages résultant du transport, de l'entreposage, d'une mauvaise installation, d'un mauvais environnement interne ou externe, d'un mauvais usage, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'une modification, d'une altération, de tout accessoire non autorisé et des dommages causés aux marchandises. Toute autre condition entraînant un défaut ou une défaillance du produit. La seule responsabilité de BEBIRD PRO en vertu de cette garantie est de sélectionner, réparer ou remplacer tout produit défectueux pendant la période de garantie, à condition que l'acheteur signale rapidement par écrit à BEBIRD PRO les défauts susmentionnés et se conforme aux conditions de cette garantie.

Spécification du produit

Marque :	Bebird pro
Nom du produit :	Cure oreille visuelle intelligente
Marque :	T15 PROv
Poids de l'hôte :	25g
Standard reseau :	IEEE 802.11b/g/n
Antenne :	antenne FPC intégrée
Fréquence de fonctionnement :	2.4Ghz
Taux de transfert d'image :	20fps
Capteur d'image :	CMOS
Température de l'environnement de travail :	14-113°F
Batterie :	Batterie au lithium 300mAh
Autonomie de la batterie :	85 minutes
Temps de charge :	85 minutes
Courant d'entrée :	DC 5V 0.5A
Diamètre de lentille :	3.5mm
Profondeur de champs :	10~50mm
Pixel :	5M
Gyroscope :	3 axe
Étanche :	seul l'objectif est étanche

Liste d'accessoire du produit

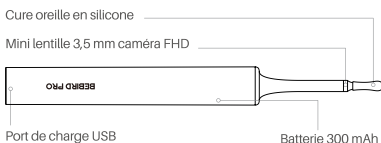

Les accessoires de cure oreille comprennent :

Kit de nettoyage avancé :

- Cure oreille métallique enveloppée par silicone(s) *2
- Cure oreille métallique enveloppée par silicone(l) *1
- Cures oreilles bicolores(s) *2
- Cures oreilles bicolores(l) *2
- Cures oreilles bicolores(r) *2
- Cures oreilles en éponge*3
- Nouveau compartiment de stockage de cure oreille(s) *2

Kit d'examen de base :

- Masque d'observation du conduit auditif*1
- masque d'observation du conduit auditif*10

Guide d'opération

Comment se connecter à l'application et l'utiliser ?



1

Scannez l'application de téléchargement de code QR (vous pouvez également télécharger APP:bebird-pro.com à partir de notre site officiel)



2

Ouvrez l'application bebird pro pour sélectionner T15 Pro.



3

Ouvrez le couvercle du produit et il allumera automatiquement.- Connectez au WiFi "bebird-pro-XXXX" de produit.



4

Revenez à l'APP bebird pro et cliquez sur Démarrer pour l'utiliser

Remplacer l'embout auriculaire



Tournez l'ancienne cuillère à oreille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'ancienne cuillère à oreille. Alignez la tige de nettoyage et la nouvelle cuillère auriculaire, puis tournez la nouvelle cuillère auriculaire dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer. Veuillez vous assurer que la cuillère à oreille est assemblée en place avant de l'utiliser pour éviter de tomber.

Dépannage

Question 1 : Le corps chauffe pendant l'utilisation

Répondre : La lentille du produit est équipée d'une LED Lampe Lumière Blanc Froid. Elle n'est pas éblouissante ni aveuglante. Le produit adopte un système de contrôle de la température avec 2 protection. Pendant l'utilisation, la température de la cuillère est de 25° et la température de l'oreille otoscope est de 32°. C'est normal que le produit peut chauffer légèrement pendant le fonctionnement. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance grâce à la haute qualité du produit.

Question 2 : Erreur d'affichage de l'APP (flou d'objectif/écran flou/noir)

Répondre : Désinstallez l'application et réessayez de la installer une fois de plus. Confirmez si le modèle de l'appareil est conforme au modèle d'application correspondante ; essuyez et nettoyez la lentille du produit avec un coton-tige sec pour confirmer si la lentille est endommagée. (Les tampons à alcool ne sont pas recommandés)

Question 3 : Pourquoi l'objectif se brouille-t-il après un lavage ?

Répondre : L'étanchéité fait référence au niveau de pression d'eau. Il n'est pas recommandé de laver directement à l'eau. Si de l'eau pénètre dans l'objectif, le séchage doit se faire dans un endroit frais et sec. Veuillez noter que seul l'objectif est étanche.

Question 4 : Le réseau WiFi est instable. La connexion est automatiquement déconnectée de temps en temps

Répondre : Le WiFi de Bebird est limité à la connexion entre le produit et l'application. Il ne peut pas accéder à Internet. Si l'application affiche « Connecté mais incapable d'accéder à Internet, il faut changer? » et cliquez sur « Non » ; si la zone de couverture WiFi est si forte que le signal est affecté par le WiFi, il est recommandé de modifier l'environnement d'utilisation.

Question 5 : Après quelques mois d'utilisation, l'application vous indique qu'elle ne se connecte pas au WiFi (La connexion précédente a réussi)

Répondre : Re-téléchargez l'application et réessayez de vous connecter.

Maintenance et support

Bebird pro garantit ses produits pendant un an à compter de la date d'achat. Bebird pro vous propose d'utiliser la marque bebird pro véritable pour obtenir les meilleures performances. L'utilisation d'une autre cure oreille peut l'endommager et limiter votre couverture de garantie.

Contactez notre l'é-mail de service après-vente :
cs@bebird-pro.com

Dépannage

Pourquoi ne pas couvrir la garantie?

- Utiliser des pièces de rechange non autorisées ou des cures oreilles non autorisés
- En raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une modification ou d'une réparation non autorisée
- Usure normale, y compris débris, rayures, changement de couleur ou décoloration

Grazie per scegliere Bebird pro!

Ci impegniamo a fornire ai clienti i migliori prodotti. Tutti i prodotti Bebird pro sono conformi ai rigorosi standard di produzione, prestazione e sicurezza.

Ci impegniamo anche a fornire il miglior servizio clienti per garantire la soddisfazione del cliente al 100%. Forniamo anche una garanzia di un anno per proteggere i diritti dei clienti. Se hai bisogno di un servizio post-vendita o di una consulenza su altri prodotti, puoi contattarci con i seguenti modi.

Precauzioni prima dell'uso



Attenzione :

1. Pulire la lente accuratamente con un batuffolo imbevuto di alcol professionale.
2. Prima dell'uso, assicurarsi che il cucchiaino per orecchio sia stato assemblato in posizione per evitare la caduta.
3. Non usare durante il movimento e proteggiti dall'essere colpito dagli altri.
4. È vietato ai bambini l'utilizzo di questo prodotto da soli per evitare eventuali danni accidentali.
5. Non mettere il prodotto in liquido per evitare danni.
6. Il prodotto ha una batteria ai polimeri incorporata, che deve essere caricata una volta al mese se non viene utilizzata spesso.
7. Evitare l'esposizione diretta del prodotto al sole, in particolare gli accessori, per non ammorbidire.
8. Durante l'uso, la temperatura del prodotto aumenterà leggermente (in base ai dati di laboratorio bebird pro, la temperatura massima della macchina non supera circa i 45 °C), utilizza con fiducia per favore.
siéntese libre de usarlo.



Disclaimer

BEBIRD PRO non garantisce che i prodotti siano esenti da difetti o danni causati da trasporto, stoccaggio, installazione improprio, ambiente interno o esterno ostile, uso improprio, abuso, negligenza, incidenti, modifiche, manomissioni, accessori accessori non autorizzati e danni ai prodotti, cattiva lavorazione o qualsiasi altra condizione che porti a difetti o malfunzionamenti dei prodotti. L'unica responsabilità di BEBIRD PRO è la riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi durante la garanzia. il periodo di garanzia è previsto che l'acquirente segnali tempestivamente il suddetto guasto per iscritto a BEBIRD PRO e si attenga ai termini della garanzia.

Specifiche del prodotto

Marca:	Bebird pro
Nome del prodotto:	Otoscopio digitale con telecamera per rimozione di cerume
Modello:	T15 PRO
Peso dell'unità principale:	25g
Standard di rete:	IEEE 802.11b/g/n
Antenna:	antenna FPC incorporata
Frequenza di lavoro:	2.4Ghz
Velocità di trasmissione d'immagine:	20 fps
Sensore di immagine:	CMOS
Temperatura dell'ambiente di lavoro:	14-113°F
Batteria:	batteria al litio da 300mAh
Durata della batteria:	85 minuti
Tempo di ricarica:	85 minuti
Corrente di ingresso:	DC 5V 0.5A
Diametro della lente:	3.5mm
Profondità di campo:	10~50 mm
Pixel:	5M
Giroscopio:	3 assi
Impermeabile:	solo l'obiettivo è impermeabile

Lista di accessori del prodotto

Cucchiaino per orecchio in silicone

Fotocamera FHD con mini obiettivo da 3,5 mm



Accessori del cucchiaino per orecchio includono:

Set di pulizia avanzata:

Cucchiaino metallico per orecchio rivestito in silicone(s) *2

Cucchiaino metallico per orecchio rivestito in silicone(l) *1

Cucchiaini in bicolore(s) *2 Cucchiaini in bicolore(l) *2

Cucchiaini in bicolore(r) *2 Cucchiaini di spugna per orecchio *3

Nuovi secchi di stoccaggio del cucchiaino per orecchio *2

Set di ispezione di base:

Copertura per l'osservazione del condotto uditivo *1

copertura per l'osservazione del condotto uditivo *10

Guida operativa

¿Cómo puedo conectar el producto a la aplicación y utilizarlo?



1

Scansiona il codice QR per scaricare l'App (puoi anche scaricare l'app dal nostro sito ufficiale: bebird-pro.com).



2

Apri l'APP bebird pro per selezionare T15 Pro.



3

Aprire il coperchio del prodotto e si accenderà automaticamente. Collega WiFi "bebirdpro-XXXX".



4

Torna all'APP bebird pro e fai clic su "Inizia" per usarlo.

Sostituisci l'auricolare



Ruota il vecchio cucchiaino per l'orecchio in senso antiorario per rimuovere il vecchio cucchiaino per l'orecchio. Allineare l'asta di pulizia e il nuovo cucchiaino per le orecchie, quindi ruotare il nuovo cucchiaino per le orecchie in senso orario per stringerlo. Assicurati che il cucchiaino per l'orecchio sia montato in posizione prima di usarlo per evitare che cada.

Risoluzione dei problemi

Domanda 1: Il corpo si riscalda durante l'uso

Risposta: L'obiettivo del prodotto è dotato di luce fredda a LED che non è abbagliante. Il prodotto è adottato un doppio sistema di controllo della temperatura. La temperatura della parte dell'otoscopio è di 25° e la temperatura del palmo del corpo è 32° durante l'uso. Pertanto una leggera febbre durante il funzionamento è normale. La qualità è sicura e puoi usarlo con sicurezza.

Domanda 2: Visualizzazione anomala dell'APP (sfocatura dell'obiettivo/macchie appaiono sullo schermo/ lo schermo diventa nero)

Risposta: Disinstallare l'APP e reinstallarla, conferma che il modello del dispositivo abbia l'APP corretta/il modello di APP corrispondente corretto; pulisci l'obiettivo del prodotto con un batuffolo di cotone asciutto per confermare se l'obiettivo è danneggiato. (Si sconsiglia di non usare i tamponi con alcool)

Domanda 3: Perché la lente si sfoca dopo il lavaggio?

Risposta: L'impermeabilità si riferisce lo spruzzi d'acqua ma non ti consigliamo lavare direttamente con acqua. Se l'acqua entra nell'obiettivo, posizionarlo in un luogo ventilato e lasciarlo asciugare. Si prega di notare che solo l'obiettivo è impermeabile.

Domanda 4: Il collegamento WiFi è instabile e la connessione viene disconnessa automaticamente frequentemente

Risposta: Il Wi-Fi dei prodotti bebird è limitato all'uso del prodotto e non può accedere a Internet. Viene visualizzato il messaggio "Connesso ma non è possibile accedere a Internet, se cambiare" e fare clic su "No"; Se l'area di copertura Wi-Fi è forte e il segnale del prodotto è influenzato dalla copertura WiFi, si consiglia di provare a utilizzarlo in alternativa ambiente.

Domanda : Dopo aver usato per alcuni mesi, l'APP mostra che non è connessa dopo la connessione al WiFi (non ci sono problemi con la connessione precedente)

Risposta : Ricarica l'APP e prova a connetterla e usarla.

Garanzia e supporto

Bebird pro offre la garanzia di un anno per i suoi prodotti dalla data di acquisto.

Bebird pro consiglia di usare il vero marchio bebird pro per ottenere la migliore prestazione. L'uso di altri cucchiaini per orecchio può danneggiare il tuo cucchiaino per orecchio e limitare la tua garanzia.

Contatta la nostra email post-vendita: cs@bebird-pro.com.

Esclusione di garanzia

Cosa non è coperto dalla garanzia?

- Uso di parti di ricambio non autorizzate o uso del cucchiaino per orecchio senza autorizzazione.
- Riparazione a causa di uso improprio, abuso, negligenza, modifica o riparazione non autorizzata.
- Normale usura, inclusi trucioli, graffi, abrasioni, cambio di colore o sbiadimento.

Gracias por comprar Bebird Pro!

Nos dedicamos a proporcionar mejores productos a los clientes, todos los productos de Bebird cumplen con los criterios más estrictos de fabricación, rendimiento y seguridad.

Nos comprometemos además con proporcionar mejor servicio al cliente para dejarlo estar completamente satisfecho, incluido además un año de garantía para proteger los derechos e intereses del cliente.

Si necesita servicio posventa u otras consultas sobre productos, puede ponerse en contacto con nosotros mediante el siguiente método.

Precauciones antes del uso



Nota:

1. Al limpiar la lente, frótela con cuidado con hisopo de alcohol profesional.
2. Asegúrese de que el limpiador de oídos esté bien ensamblado antes de usar para no caerse.
3. No lo use durante el movimiento, cuídese de usted para no ser golpeado por otros.
4. No permita que los niños usen independientemente el producto para evitar lesiones accidentales.
5. No ponga el producto en el líquido para evitar los daños.
6. El producto contiene batería de polímero incorporada, es necesario cargar una vez cada mes si no lo usa con frecuencia.
7. Evite que se exponga bajo el sol directamente, especialmente los accesorios, para evitar el ablandamiento.
8. La temperatura del producto puede subir un poco durante el uso (según los datos del laboratorio de Bebird Pro, la temperatura máxima del producto no supera los 45 °C), siéntese libre de usarlo.




Descargo de responsabilidad

BEBIRD PRO no garantiza que sus mercancías estén libres de defectos o daños causados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuados, ambiente hostil interno o externo, mal uso, abuso, negligencia, accidentes, modificaciones, alteraciones, accesorios o partes no autorizadas y daños a la mercancía. Mano de obra deficiente o cualquier otra condición que cause defectos o mal funcionamiento del producto. La única responsabilidad de BEBIRD PRO bajo esta garantía es que durante su selección, reparación o reemplazo de cualquier producto que falle durante este periodo de garantía, la premisa es que el comprador informe de inmediato a BEBIRD PRO por escrito sobre la falla anterior y cumpla con los términos de esta garantía.

Especificaciones del producto

Marca:	Bebird pro
Nombre del producto:	Smart Visual Ear-Clean Rod
Modelo:	T15 PRO
Peso del producto:	25 g
Estándar de red:	IEEE 802.11b/g/n
Antena:	Internal FPC antenna
Frecuencia de trabajo:	2.4Ghz
Tasa de transmisión de imagen:	20 fps
Sensor de imágenes:	CMOS
Temperatura ambiente de trabajo:	14-113°F
Batería:	batería de litio de 300 mAh
Duración de la batería:	85 minutos
Tiempo de carga:	85 minutos
Corriente de entrada:	CC 5V 0.5A
Diámetro de la lente:	3.5mm
Profundidad de campo:	10 - 50 mm
Pixel:	5M
Giroscopio:	3 ejes
Resistente al agua:	solo la lente es resistente al agua

Lista de accesorios del producto

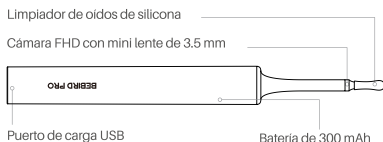

Los accesorios del limpiador de oídos contienen:

Conjunto de limpieza de nivel avanzado:

- limpiador de oídos de metal cubierto de silicona(s)*2
- limpiador de oídos de metal cubierto de silicona(l)*1
- limpiadores de oídos de doble color(s)*2
- limpiadores de oídos de doble color(l)*2
- limpiadores de oídos de doble color(r)*2
- limpiadores de oídos de esponja*3
- Cubos de almacenamiento para el limpiador de oídos tipo nuevo(s)*2

Conjunto básico para la inspección:

- Cubierta para la observación del canal auditivo*1
- cubierta para la observación del canal auditivo * 10

Guía de operación

Come collegarsi all'APP e usare?



1

Escanee el código QR para descargar la aplicación (también puede descargar la aplicación mediante nuestro sitio web oficial: bebird-pro.com).



2

Abra la aplicación Bebird pro, elija T15 Pro.



3

Abra la tapa del producto y se encenderá automáticamente. Conecte el WiFi del producto "bebirdpro-XXXX".



4

Vuelva a la aplicación Bebird pro, haga clic en "comenzar" para usarlo.

Reemplazar la punta del oído



Gire la cuchara de oreja vieja en sentido antihorario para quitar la cuchara de oreja vieja. Alinee la varilla de limpieza y la nueva cuchara para el oído, luego gire la nueva cuchara en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. Asegúrese de que la cuchara para el oído esté ensamblada en su lugar antes de usarla para evitar que se caiga.

Solución de problemas

Pregunta 1: El cuerpo se calienta durante el uso

Respuesta: La lente del producto está equipada con una lámpara LED de luz fría, que no deslumbra. El producto adopta un sistema de control de temperatura dual. Durante el uso, la temperatura de la parte del otoscopio es de 25 y la temperatura de la palma de la parte del cuerpo es de 32, por lo que ocurre durante la operación del producto, un calentamiento leve es normal y la calidad es segura, por lo que puede usarlo con confianza.

Pregunta 2: Visualización anormal de la aplicación (lente borrosa/pantalla borrosa/pantalla negra)

Respuesta: Desinstale la APP y vuelva a instalarla, confirme que el modelo del dispositivo tiene la APP correcta/el modelo de APP correspondiente correcto; limpie la lente del producto con un hisopo de algodón seco para confirmar si la lente está dañada. (No se recomiendan los hisopos con alcohol).

Pregunta 3: ¿Por qué la lente se vuelve borrosa después del lavado?

Respuesta: Impermeable se refiere al agua a prueba de salpicaduras. No se recomienda lavar con agua directamente. Si el agua entra en la lente, puede evitarlo que secándola en un lugar ventilado. Tenga en cuenta que solo la lente es resistente al agua.

Pregunta 4: El enlace WiFi es inestable y la conexión se desconecta automáticamente de vez en cuando.

Respuesta: El WiFi del producto Bebird se limita al uso del producto y no puede acceder a Internet. Aparece "Conectado pero no puede acceder a Internet, si desea cambiar" y hacer clic en "No"; si el área de cobertura WiFi es fuerte y la señal del producto se ve afectada por la cobertura WiFi, se recomienda a los usuarios que lo cambien.

Pregunta 5: Después de usar durante unos meses, la **APLICACIÓN** muestra que no está conectada después de conectarse al WiFi (no hay problema con la conexión anterior)

Respuesta: Vuelva a descargar la **APLICACIÓN** e intente conectarse y usarla.

Garantía y soporte

Bebird pro ofrece un año de garantía para sus productos a partir del día de compra.

Bebird pro recomienda usar los productos de la marca verdadera. Bebird pro para obtener el rendimiento óptimo. Usar otros limpiadores de oídos puede provocar daños y limitar su alcance de garantía.

Póngase en contacto con nosotros a: cs@bebird-pro.com.

Soluciones de fallas

Los que no están incluidos en la garantía?

- El reemplazo sin autorización de las piezas o el uso sin autorización del limpiador de oídos.
- Uso incorrecto, abuso, negligencia, modificación o reparación sin autorización.
- Desgastes comunes, incluidas astillas, rasguños, cambiar o perder de color por desgastes.

日本語

Bebird proをご購入いただき、ありがとうございます！

お客様に最高の製品をお届けすることに取り組んでおり、すべてのBebirdpro製品は、厳格な製造、性能、安全基準を満たしています。

また、最高のカスタマーサービスを提供することに取り組んでおり、お客様に100%ご満足いただけるために、1年間保証を提供しています。

アフターサービスや製品に関するその他の相談が必要な場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。

ご使用前の注意事項



ご注意:

1. レンズを掃除する時は、アルコール綿棒でゆっくり拭いてください。
2. 耳かきが落ちないように、使用前に所定の位置に組み立てられていることを確認してください。
3. 他の人にぶつからないように、移動しながら使用しないでください。
4. 事故による怪我を防ぐために、お子様による本製品の使用はお控えください。
5. 損傷を防ぐために、製品を液体に入れないでください。
6. 本製品にはリチウムポリマー電池が内蔵されており、長期間使用しない場合は、月に1回充電する必要があります。
7. 軟化しないように、製品、特に付属品を直射日光にさらさないでください。
8. 使用中、製品の温度はわずかに上昇しますが (bebird proラポのデータにより、本製品の最高温度は約45°Cです)、安心して使用してください。




免責声明

BEBIRD PRO は、製品に欠陥や輸送、貯蔵、設置の不適切な損傷、内部または外部の敵対環境、任意の許可されていない付属部品を誤用、乱用、不注意、事故、修正、改ざんすること、製品、プロセス不良、またはその他の条件により製品の欠陥や誤動作が発生することに対して保証できません。BEBIRD PRO のこの保証での唯一の責任は、選択した保証期間中に、この期間中に故障した商品の修理または交換です。お客様が直ちに書面でBEBIRD PRO に障害を報告し、本保証条項を遵守することを前提としています。

製品仕様

ブランド:	Bebird pro
製品名:	スマート可視化耳かき
型番:	T15 PRO
本体の重量:	25g
ネットワーク規格:	IEEE 802.11b/g/n
アンテナ:	FPCアンテナ内蔵
動作周波数:	2.4Ghz
画像伝送速度:	20fps
イメージセンサー:	CMOS
動作環境温度:	-10～45℃
電池:	300mAhリチウム電池
電池駆動時間:	85分
充電時間w:	85分
入力パラメータ:	DC 5V 0.5A
レンズ径:	3.5mm
被写界深度:	10～50mm
画素:	5M
ジャイロ스코プ:	3軸
防水:	レンズのみ防水

付属品一覧

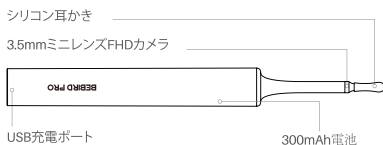

イヤースプー付属品一覧:

プロフェッショナルクリーニングキット:

金属+シリコン製イヤースプー(s)*3

2色イヤースプー(s)*2

2色イヤースプー(r)*2

耳スプーン収納ケース*1

2色イヤースプー(l)*2

スポンジイヤースプーン*3

スタンダード検査セット:

外耳道観察用カバー*1

外耳道観察用カバーセット×10個*1

操作方法

アプリと接続して使用する方法？



1

QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします(または当社の公式サイト「bebird-pro.com」からもアプリをダウンロードできます)。



2

bebird proアプリを開き、「T15 Pro」を選択します。



3

製品の骨子、排ガスを運転する。製品のWiFi「bebirdpro-XXXX」に接続します。



4

bebird proアプリに戻り、「開始」をタップして使用します。

イヤースプーンの交換



金属リングを回して、イヤースプーンを抜き出して取り替えできます
イヤースプーンをカメラ先端に合わせて、金属リングを締め付きます
イヤースプーンを挿し込めて締めます
金属リングを置き、締め付きます
イヤースプーンが落ちるのを防ぐために、使用前に必ず所定の位置に組み立てなければなりません

よくあるご質問

質問：使用中に本体が発熱します

答える：製品レンズにLED冷光ランプが設置され、まぶしくなく、グレアはありません。製品は二重温度制御システムを採用し、使用中には、耳鏡部分の無感温度は25°で、本体部分の手のひら温度は32°です。そのため、製品の動作中にわずかな発熱が生じるのは正常な現象です。品質は安全で、安心して使用していただけます。

質問：APP表示異常(レンズボケ/画面がボケます/画面が黒くなります)

答える：APPをアンインストールして再インストールしてください。デバイス型番には対応する正しいAPP / 正しい対応するAPP型番があることをご確認ください。乾燥の綿棒でレンズをきれいに拭いて、レンズが破損しているかどうかをご確認ください。(アルコール綿棒はお勧めしません)。

質問：レンズはなぜ水洗いしてぼやけていますか

答える：防水とは、水がはねないことを意味します。水で直接すすぐことはお勧めしません。レンズに水が入る場合、換気の良い場所で乾わしてください。レンズのみ防水ですのでご注意ください

質問：WiFi接続が不安定で、自動的に接続が切断されることがあります

答える：bebird製品のWiFiは製品の使用のみでき、インターネットにアクセスできません。「接続されているがインターネットにアクセスできない。切り替えるか」と表示されると、「いいえ」をクリックしてください。インターネット接続できないWiFiはWiFiカバーエリアでの信号が製品WiFiの使用に強く影響している場合は、使用環境を交換してみてください。

質問：数ヶ月使用した後、WiFi接続後にアプリに接続されていないと表示されます(これまでの接続や使用には問題ありません)

答える：アプリを再ダウンロードして接続してみてください。

保証とサポート

Bebird proは、製品に対してご購入日より1年間保証を提供します。

最高の性能のために、純正品のbebird pro製品を使用することをお勧めします。他の耳かきを使用すると、耳かきが損傷し、保証対象外となる場合があります。

お問い合わせ:cs@bebird-pro.com

保証対象外

下記のいずれかに該当する場合は、保証対象外となります？

- 非純正品の交換部品を使用し、または不適切な方法で耳スプーンを使用した場合
- 誤用、乱用、過失、改ざん、または自ら修理した場合
- 破片、引っかき傷、摩耗、変色または退色を含む正常な磨損の場合