


CUREGO Note 3 PRO MAX

USER MANUAL

Creativity For Your Health

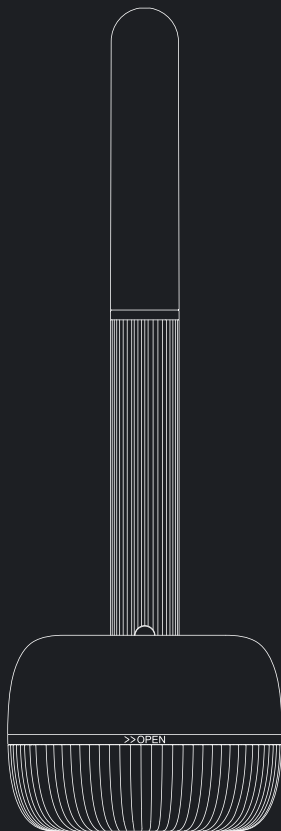

 @curego  @curego  @curego
 cs@curegos.com  curego

CONTENT


1. ENGLISH -----	03-07
2. Deutsch -----	08-12
3. Français -----	13-17
4. Italiano -----	18-22
5. Español -----	23-27
6. 日本語 -----	28-32

Dear Customers :

Thank you for purchasing an CUREGO product. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our Email: cs@curegos.com with your product model number and Amazon/Website order number. We will make every effort possible to ensure your satisfaction with your purchase as well as resolve any issues you run into. In addition, we are looking forward to your valuable opinions about our products. Every comment will be valued by CUREGO.

Package Contents


Note 3 Pro Max*1

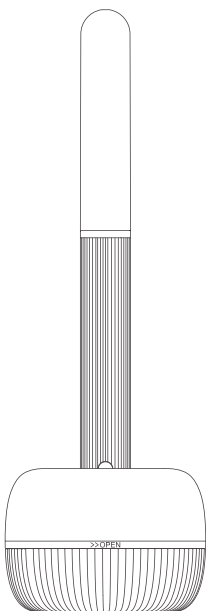

Silicone ear spoon(in the base)*12




Alcohol swab *5

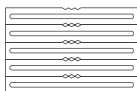

Softened swab *5



Small brush*1 Protective plug*1

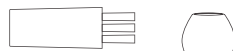

Type-C Cable*1



OPERATING GUIDE

How to Connect APP and Use it?




- 1 Scan QR code to download APP.(you can also download APP from our official website: curegos.com)



- 2 Open curego APP, select curego Note 3, then open the product cover and it will power on automatically




- 3 Connect product WiFi "curego-XXXX"

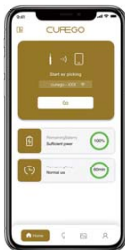

- 4 Touch the start button to use it

How to replace ear spoon?

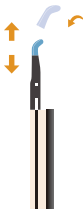

Unscrew the fixed ring and pull out the old ear spoon. Install the new ear spoon and tighten the fixed ring. Please make sure the ear spoon is assembled in place before using to prevent falling off.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Pre-use Notice :

1. Please make sure this product was purchased from a legal sales channel.
2. This product may contain small parts, and we strongly advise you to keep this product away from infants and children, so as to prevent a choking hazard or possible injury.
3. Before using, please make sure the product hasn't been damaged or broken, or fallen to the ground. If there are any of these conditions, please check to ensure that it doesn't affect the use.
4. This product is recommended to be stored in a cool and dry place. Keep away from moisture and dust, otherwise it may be damaged.
5. Keep the product away from hazardous areas or materials exposed to flames or easy to burn.

Disclaimer :

CUREGO does not guarantee its goods against any defect or damage caused by transportation, storage, improper installation and maintenance, internal or external hostile environments, misuse, abuse, negligence, accident, modification, tampering, the attachment of any unauthorized accessory, alteration to the goods, poor workmanship, or any other conditions whatsoever that cause a defect or failure of the product.

CUREGO's sole responsibility under this warranty shall be, at its option, to either repair or replace any goods which fail during the warranty period, provided that the buyer has promptly reported the said failure to CUREGO in writing, and complies with the provisions of this warranty.

PRODUCT SPECIFICATION

Brand :	CUREGO
Product Name :	Smart Visual Earwax Cleaning Tool
Modell :	Note 3 Pro Max
Rod Weight :	128g
Network Standard :	IEEE802.11b/g/n
Antenna :	Internal FPC antenna
Working Frequency :	2.4Ghz
Image Transmission Rate :	20fps
Image Sensor :	CMOS
Working Temperature :	14-113°F
Battery :	300mAh lithium battery
Using time after fully charged :	70 minutes
Charging time :	60 minutes
Input Voltage :	DC 5V 0.5A

Lens Diameter :	3.5mm
Depth of Field :	15 ~ 20mm
Pixel :	10 million pixels
Gyroscope :	360° Gyroscope

TROUBLE SHOOTING

Question 1 : The product body heats up during use

Answer : The product lens is equipped with an LED light, which is not dazzling or glare. And the product adopts a dual temperature control system. During use, the otoscope part has a non-sensing temperature of 25° and the body part's palm temperature is 32°. Therefore, It is a normal phenomenon that the product occurs with slight heat during the operation. The product is safe, so you can use it with confidence

Question 2 : Abnormal connection

Answer : Confirm whether the machine is turned on in a normal state (the ring indicator flashes when not connected, and the indicator light will be always on after successful connection)

Question 3 : APP display abnormally (lens blur/fuzzy/black screen)

Answer : Uninstall the APP and reinstall, confirm that the right machine model has been choosed on APP . Wipe the lens of the product with an dry swab to check whether the lens is damaged. (Not advise alcohol swab)

Question 4 : Abnormal charging: After using for a period of time (months/half a year), it can't be charged or can't be turned on after charging

A : Wireless charging by magnetic base: place the device on a horizontal table. If the indicator light flashes abnormally while charging, please turn the product body to check whether it can be charged normally. If the contact is poor and usage has been affected, please contact customer service.

Question 5 : The WiFi connection is unstable, and the connection will be automatically disconnected from time to time

A : The WiFi of products is limited to the use of the product and cannot access the Internet. When it prompts connected but unable to access the Internet, whether to switch, please click "NO"; if the WiFi coverage area is strong and the signal of the product is affected by the WiFi coverage, it is recommended to change the environment and try.

Question 6 : After using it for a period of time, the indicator light will go out soon when charging, and it will not turn on.

Answer : Try to turn the product or contact again to check whether the charging contact is bad.

Question 7 : After using it for a few months, the APP shows that it is not connected after connecting to WiFi (there is no problem with the previous connection)

Answer : Re-download the APP and try to connect and use it.

Warranty

All CUREGO products are under CUREGO's warranty for **ONE Year** after the date of the original purchase. CUREGO recommends using genuine products and accessories purchased from our brand for optimal performance. Using other brush heads may damage your ear scoop and limit your warranty coverage. Contact our after-sales email: cs@curegos.com

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered by the warranty?

- Use of unauthorized replacement parts or Unauthorized use of the ear scoop.
- Use of the brush head due to misuse, abuse, neglect, alteration, or unauthorized repairs.
- Normal wear and tear, including debris, scratches, scuffs discoloration or fading.

Produktbeschreibung und Inhaltsverzeichnis :

Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt von CUREGO entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Bei Fragen bitte wenden Sie sich direkt an cs@curegos.com mit Ihrem Produktmodell und Ihrer Bestellnummer auf Amazon. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und werden eine zufriedenstellende Lösung bieten. Außerdem freuen wir uns über Ihre wertvollen Kommentare zu unseren Produkten. Jeder Kommentar wird von CUREGO geschätzt.


Packungsinhalt

Note 3 Pro Max*1


Silikonohröffel (in der Basis) *12



Alkoholtupfer *5

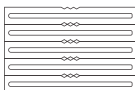



Schrumpfter Tupfer *5

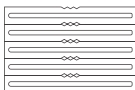

Kleine Bürste*1 Schutzstecker*1



Typ-C-Ladekabel*1

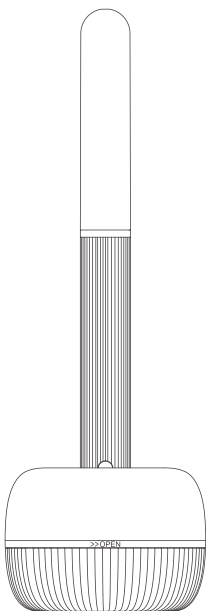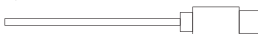

Betriebsanweisung

Verbindung mit App




- 1 Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen



- 2 Öffnen Sie die APP „CUREGO“ und wählen Sie CUREGO Note 3. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, nachdem der Deckel des Geräts geöffnet wurde.




- 3 Verbinden Sie das Gerät mit WiFi „CUREGO-XXXX“ und kehren Sie zur APP „CUREGO“ zurück. Drücken Sie die Starttaste zum Verwenden

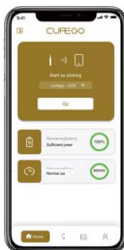

- 4 Touch the start button to use it

Wie kann man Ohrhörer ersetzen?

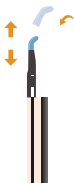

Schrauben Sie den festen Ring ab und ziehen Sie den alten Ohrhörer heraus. Setzen Sie den neuen Ohrhörer ein und ziehen Sie den festen Ring fest. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ohrhörer vor der Verwendung montiert ist, um ein Herunterfallen zu verhindern

Wichtige Sicherheitshinweise

Hinweise vor dem Gebrauch :

- 1. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Produkt über einen legitimen Vertriebskanal von der Marke CUREGO erworben wurde.
- 2. Dieses Produkt enthalten Kleinteile. Es wird dringend empfohlen, dieses Produkt von Säuglingen und Kindern fernzuhalten, um eine Erstickungsgefahr oder mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- 3. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Produkt nicht beschädigt oder zerbrochen wurde oder auf den Boden gefallen ist. Falls ja, stellen Sie bitte sicher, dass die Verwendung nicht beeinträchtigt wird.
- 4. Das Produkt sollte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden und vor Feuchtigkeit und Staub geschützt werden, da es sonst beschädigt werden kann.
- 5. Halten Sie das Produkt von gefährlichen Bereichen fern und vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen oder brennbaren Materialien.

Haftungsausschluss :

CUREGO übernimmt keine Garantie für seine Waren gegen Mängeln oder Schäden, die durch unsachgemäße Transport, Lagerung, Installation und Wartung, interne oder externe feindliche Umgebungen, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfälle, Modifikationen, Manipulationen, das Anbringen von nicht genehmigtem Zubehör, Änderungen an den Waren, mangelhafte Verarbeitung oder andere Bedingungen, die zu einem Defekt oder Ausfall des Produkts führen, verursacht werden. CUREGO ist im Rahmen dieser Garantie nur für die Reparatur oder den Ersatz von Waren verantwortlich, die während der Garantiezeit ausfallen, vorausgesetzt, der Käufer hat CUREGO diesen Ausfall unverzüglich schriftlich gemeldet und die Bestimmungen dieser Garantie eingehalten.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Marke :	CUREGO
Produktname :	Intelligentes visuelles Ohrenschmalz-Reinigungswerkzeug
Modell :	Note 3 Pro Max
Stangengewicht :	128g
Netzwerkstandard :	IEEE802.11b/g/n
Antenne :	Interne FPC-Antenne
Arbeitsfrequenz :	2.4Ghz
Bildübertragungsrate :	20fps
Bildsensor :	CMOS
Arbeitstemperatur :	14-113°F

Batterie :	300mAh Lithiumbatterie
Nutzungszeit nach vollständiger Aufladung:	70 minutes
Ladezeit :	60 minutes
Eingangsspannung :	DC 5V 0.5A
Lensendurchmesser :	3.5mm
Schärfentiefe :	15 ~ 20mm
Pixel :	10 million pixels
Gyroskop :	360° Gyroskop

Fehlerbehebung

1F : Das Produkt erwärmt sich während des Gebrauchs

A : Die Linse des Produkts hat eine LED-Kaltlichtlampe, die nicht blendet oder grell ist. Das Produkt verfügt über ein duales Temperaturskontrollsystem. Während des Gebrauchs hat das Otoskop eine nicht-empfindliche Temperatur von 25 °C und die Temperatur des Körpers beträgt 32 °C. Dies ist ein normales Phänomen, wenn das Produkt während des Betriebs eine leichte Erwärmung auftritt. Die Qualität ist sicher und es kann mit Vertrauen verwendet werden.

2F : Ausnahme bei der Verbindung

A : Suche nach WiFi des Produktes „CUREGO-XXXX“ nicht möglich
Überprüfen Sie, ob das Gerät in einem normalen Zustand eingeschaltet ist (die Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet und nicht verbunden ist; die Kontrollleuchte leuchtet nach der Verbindung immer).

3F : Ausnahme bei der APP-Anzeige (Linse unscharf/ Bildschirm verschwommen/ schwarzer Bildschirm)

A : Deinstallieren Sie die APP und installieren Sie sie erneut. Stellen Sie sicher, dass das Modell über die richtige APP verfügt. Wischen Sie die Linse des Geräts mit einem trockenen Tupfer ab und prüfen Sie, ob die Linse beschädigt ist. (Alkoholtupfer ist nicht empfohlen)

4F : Ausnahme beim Aufladen: Nach einer gewissen Zeit (ein paar Monate / sechs Monate) kann das Gerät nicht aufgeladen werden. Oder das Gerät schaltet sich nach dem Aufladen immer noch nicht ein.

A : Kabelloses Laden durch Magnetfuß: Stellen Sie das Gerät auf einen horizontalen Tisch. Wenn die Kontrollleuchte während des Ladevorgangs ungewöhnlich blinkt, drehen Sie bitte das Produktgehäuse, um zu überprüfen, ob es normal aufgeladen werden kann. Wenn der Kontakt schlecht ist und die Nutzung beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

5F : Die WiFi-Verbindung instabil und oft automatisch unterbrochen

A : Das WiFi der CUREGO-Produkte ist auf die Verwendung des Produkts beschränkt und kann nicht auf das Internet zugreifen. Klicken Sie auf „Nein“, wenn Sie gefragt werden „Verbunden, aber kein Internetzugang, möchten Sie wechseln?“. Wenn der WiFi-Abdeckungsbereich ein starkes Signal aufweist und somit die Nutzung von WiFi des Produkts beeinträchtigt wird empfohlen, eine andere Nutzungsumgebung zu versuchen.

6F : Die Kontrollleuchte erlischt nach einer gewissen Zeit während des Ladevorgangs und das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.

A : Tauschen Sie das Datenkabel aus oder ändern Sie das Ladegerät auf direktes USB/Type-C -Aufladen. Drehen Sie das Gerät um, um zu prüfen, ob der Ladekontakt schlecht ist.

7F : Nach einigen Monaten der Nutzung zeigt die APP nach dem Verbinden mit dem WiFi keine Verbindung an (vorher hatte die Verbindung kein Problem)

A : Laden Sie die App erneut herunter und stellen Sie die Verbindung wieder her.

Garantie

Alle CUREGO-Produkte unterliegen der CUREGO-Garantie für EIN Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum. CUREGO empfiehlt die Verwendung von Originalprodukten und -zubehör, die von unserer Marke gekauft wurden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Verwendung anderer Bürstenköpfe kann Ihre Ohrschaufel beschädigen und Ihre Garantieleistung einschränken. Kontaktieren Sie unsere After-Sales-E-Mail: cs@curegos.com

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Was ist nicht von der Garantie abgedeckt?

- Verwendung von nicht autorisierten Ersatzteilen oder nicht autorisierte Verwendung der Ohrmuschel.
- Verwendung des Bürstenkopfes aufgrund von Missbrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, Veränderung oder nicht autorisierten Reparaturen.
- Normale Abnutzung, einschließlich Ablagerungen, Kratzer, Abnutzungsverfärbungen oder Ausbleichen.

Présentation et Sommaire :

Cher client,

Merci d'avoir choisi CUREGO. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Il est important de conserver ces instructions dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre assistance par e-mail: cs@curegos.com. Veuillez offrir le modèle de votre produit et le numéro de commande Amazon. Nous mettrons tout en œuvre pour que votre achat soit satisfaisant et que nous vous aidions à résoudre le problème que vous rencontrez. De plus, Nous attendons avec impatience vos suggestions, commentaires et améliorations.

Chaque commentaire sera évalué par CUREGO.


Packungsinhalt

Note 3 Pro Max* 1

Cuillère en silicone (en bas) * 12



Tampon alcoolisé * 5

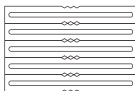

Tampon adoucissant * 5




Pinceau * 1

Fiche de protection * 1



Câble USB Type C * 1

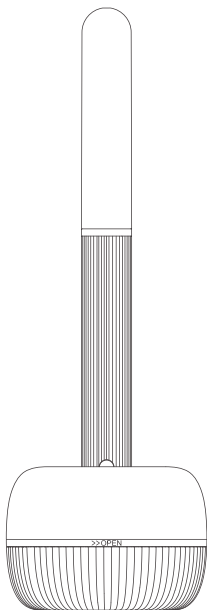

Guide d'utilisation

Comment connecter l'application



- 1 Scannez le code QR pour télécharger l'application.



- 2 Ouvrez l'application CUREGO et sélectionnez CUREGO Note 3;
Le produit démarre automatiquement lorsque le capot est ouvert




- 3 Connectez à des réseaux Wi-Fi®curego-XXXX®;
Appuyez sur l'icône pour commencer à utiliser dans l'application CUREGO



- 4 Touch the start button to use it

Comment remplacer la cuillère à oreille?

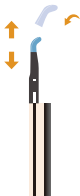

Dévissez l'anneau fixe et retirez l'ancienne cuillère à oreille. Installez la nouvelle cuillère à oreille et serrez la bague fixe. Veuillez vous assurer que la cuillère à oreille est assemblée en place avant de l'utiliser pour éviter de tomber.

Consignes de sécurité importantes

A savoir avant de l'utilisation

1. Assurez-vous que votre produit est acheté auprès des canaux de vente légaux de la marque curego.
2. Ce produit peut contenir de petites pièces. Il est recommandé de garder ce produit hors de la portée des nourrissons et des enfants afin d'éviter tout risque de blessure.
3. Avant de l'utilisation, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé ou tombé au sol. Vérifiez si ces conditions affectent l'utilisation.
4. Il est recommandé de conserver ce produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la poussière, sinon il peut être endommagé.
5. Tenez le produit à l'écart des zones dangereuses ou en contact avec des flammes ouvertes ou des matériaux inflammables.

Avis de non-responsabilité : (Avertissement)

Curego ne garantit pas que les appareils sont exempts de défauts ou de dommages résultant du transport, de l'entreposage, d'une mauvaise installation, d'un mauvais environnement interne ou externe, d'un mauvais usage, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'une modification, d'une altération, de tout accessoire non autorisé et des dommages causés aux marchandises. Toute autre condition entraînant un défaut ou une défaillance du produit. La seule responsabilité de curego en vertu de cette garantie est de sélectionner, réparer ou remplacer tout produit défectueux pendant la période de garantie, à condition que l'acheteur signale rapidement par écrit à curego les défauts susmentionnés et se conforme aux conditions de cette garantie.

SPÉCIFICATION DE PRODUIT

Marque :	CUREGO
Nom du produit :	outil de nettoyage de cérumen visuel intelligent
Modèle :	Note 3 Pro Max
Poids de la tige :	128g
Norme de réseau :	IEEE802.11b/g/n
Antenne :	antenne FPC interne
Fréquence de travail :	2.4Ghz
Taux de transmission d'image :	20fps
Capteur d'image :	CMOS
Température de fonctionnement :	14-113°F
Batterie :	batterie au lithium 300mAh
Temps d'utilisation après une charge complète :	70 minutes

Temps de charge :	60 minutes
Tension d'entrée :	DC 5V 0.5A
Diamètre de l'objectif :	3.5mm
Profondeur de champ :	15 ~ 20mm
Pixel :	10 millions de pixels
Gyroscope :	Gyroscope de 360°

Dépannage

1Q : Le corps chauffe pendant l'utilisation

A : La lentille du produit est équipée d'une LED Lampe Lumière Blanc Froid. Elle n'est pas éblouissante ni aveuglant. Le produit adopte un système de contrôle de la température avec 2 protection. Pendant l'utilisation, la température de la cuillère est de 25° et la température de oreille otoscope est de 32°. C'est normal que le produit peut chauffer légèrement pendant pendant le fonctionnement. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance grâce à la haute qualité du produit.

2Q : la connexion anormale

R : [Impossible de détecter ou de trouver des réseaux CUREGO-xxxx]
Confirmez si l'appareil démarre (l'indicateur clignote lorsque l'appareil démarre et non connectée, et le indicateur annulaire est toujours allumé après la connexion)

3Q : Erreur d'affichage de l'APP (flou d'objectif/écran flou/noir)

R : Désinstallez l'application et réessayer de la installer une fois de plus.
Confirmez si le modèle de l'appareil est conforme au modèle d'application correspondante ; essayez et nettoyez la lentille du produit avec un coton-tige sec pour confirmer si la lentille est endommagée. (Les tampons à alcool ne sont pas recommandés)

4Q : Charge anormale : Après une période d'utilisation(mois/semestre d'un an), il ne peut pas être chargé ou il ne peut pas être allumé après la charge.

A : Recharge sans fil par base magnétique : placez l'appareil sur une table horizontale. Si le voyant lumineux clignote anormalement pendant la charge, veuillez tourner le corps du produit pour vérifier s'il peut être chargé normalement. Si le contact est mauvais et que l'utilisation a été affectée, veuillez contacter le service client.

5Q : Le réseau WiFi est instable. La connexion est automatiquement déconnectée de temps en temps

R : Le WiFi de CUREGO est limité à la connexion entre le produit et l'application. Il ne peut pas accéder à Internet. Si la application affiche « Connecté mais incapable d'accéder à Internet, il faut changer? » et cliquez sur « Non » ; si la zone de couverture WiFi est si forte que le signal est affecté par le WiFi, il est recommandé de modifier l'environnement d'utilisation.

6Q : Au fil du temps, la lampe de témoin s'éteint bientôt lors de la charge et elle ne s'allumera pas

A : Essayez de changer le câble de données ou le chargeur. Confirmez si le contact est normal.

7Q : Après quelques mois d'utilisation, l'application vous indique qu'elle ne se connecte pas au WiFi (La connexion précédente a réussie)

A : Re-téléchargez l'application et réessayez de vous connecter.

Garantie

Tous les produits CUREGO sont sous garantie CUREGO pendant UN an après la date d'achat d'origine. CUREGO recommande d'utiliser des produits et accessoires authentiques achetés auprès de notre marque pour des performances optimales. L'utilisation d'autres têtes de brosse peut endommager votre écope d'oreille et limiter votre couverture de garantie. Contactez notre email SAV : cs@curegos.com

EXCLUSION DE GARANTIE

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

- Utilisation de pièces de rechange non autorisées ou Utilisation non autorisée de l'oreillette.
- L'utilisation de la tête de brosse en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une altération ou de réparations non autorisées.
- Usure normale, y compris les débris, les rayures, les éraflures, la décoloration ou la décoloration."

Introducción y Catálogo :

Estimado cliente:

Gracias por adquirir un producto CUREGO. Por favor, lea este manual de usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro correo electrónico: cs@curegos.com y proporcione el modelo de su producto y el número de pedido de Amazon/sitio web. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que su compra sea satisfactoria y resolver cualquier problema que encuentre. Además, esperamos sus valiosos comentarios sobre nuestros productos.

Cada comentario será valorado por CUREGO.


Contenidos del paquete

Note 3 Pro Max*1


Silicono dell'orecchio (nella base)*12



Sapore di alcool *5

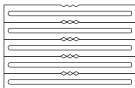



Divorziato tampone *5

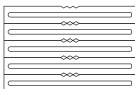

Piccolo pennello*1 Protective plug*1



Cable de carga tipo C*1

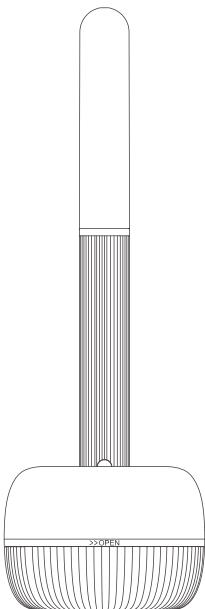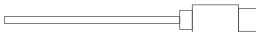

Guía de funcionamiento

Tutorial para conectar la APP:



- 1 Escanee el código QR para descargar la APLICACIÓN.



- 2 Abra la APLICACIÓN CUREGO y seleccione CUREGO Note 3;
Se enciende automáticamente cuando se abre la tapa.




- 3 Conecte el producto WiFi "curego-XXXX";
Regrese a la APLICACIÓN CUREGO,
presione comenzar a usar.



- 4 Touch the start button to use it

¿Cómo reemplazar la cuchara de oreja?

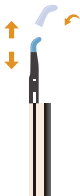

Svitare l'anello fisso ed estrarre il vecchio cucchiaino per le orecchie. Installa il nuovo cucchiaino per le orecchie e stringi l'anello fisso. Assicurati che il cucchiaino per l'orecchio sia montato in posizione prima dell'uso per evitare che cada.

Instrucciones de seguridad importantes

Sepa antes de usar

1. Por favor, asegúrese de comprar este producto en los canales de venta legales de la marca CUREGO.
2. Este producto puede contener piezas pequeñas. Recomendamos encarecidamente que mantenga este producto fuera del alcance de bebés y niños para evitar el riesgo de asfixia o posibles lesiones.
3. Antes de usar, asegúrese de que el producto no esté dañado o que se haya caído al suelo. Si se dan estas condiciones, verifique que no afecte a su uso.
4. Se recomienda almacenar este producto en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad y el polvo, de lo contrario podría dañarse.
5. Mantenga el producto alejado de áreas peligrosas o en contacto con llamas abiertas o materiales inflamables.

Descargo de responsabilidad

CUREGO no garantiza que sus mercancías estén libres de defectos o daños causados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuados, ambiente hostil interno o externo, mal uso, abuso, negligencia, accidentes, modificaciones, alteraciones, accesorios o partes no autorizadas y daños a la mercancía. Mano de obra deficiente o cualquier otra condición que cause defectos o mal funcionamiento del producto. La única responsabilidad de CUREGO bajo esta garantía es que durante su selección, reparación o reemplazo de cualquier producto que falle durante este período de garantía, la premisa es que el comprador informe de inmediato a CUREGO por escrito sobre la falla anterior y cumpla con los términos de esta garantía.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Marca :	CUREGO
Nombre del producto :	herramienta de limpieza visual inteligente de cerumen
Modelo :	Note 3 Pro Max
Peso de la varilla :	128 g
Estándar de red :	IEEE802.11b/g/n
Antena :	antena FPC interna
Frecuencia de trabajo :	2.4Ghz
Velocidad de transmisión de imagen :	20fps
Sensor de imagen :	CMOS
Temperatura de trabajo :	14-113°F
Batería :	batería de litio de 300 mAh
Tiempo de uso después de la carga completa :	70 minutos
Tiempo de carga :	60 minutos
Voltaje de entrada :	DC 5V 0.5A
Diámetro de la lente:	3.5mm

Profundidad de campo :	15 ~ 20mm
Pixel :	10 millones de pixeles
Giroscopio :	Giroscopio 360°

Solución de problemas

1P : El cuerpo se calienta durante el uso

R : La lente del producto está equipada con una lámpara LED de luz fría, que no deslumbra. El producto adopta un sistema de control de temperatura dual. Durante el uso, la temperatura de la parte del otoscopio es de 25 y la temperatura de la palma de la parte del cuerpo es de 32, por lo que ocurre durante la operación del producto, un calentamiento leve es normal y la calidad es segura, por lo que puede usarlo con confianza.

2P : Conexión anormal

R : [No se puede encontrar el WiFi del producto CUREGO-xxxx]
 Confirme si la máquina se ha encendido en un estado normal (el indicador de anillo parpadea cuando está encendido y no conectado, y la luz indicadora está siempre encendida después de la conexión)

3P : Visualización anormal de la aplicación (lente borrosa/pantalla borrosa/pantalla negra)

R : Desinstale la APP y vuelva a instalarla, confirme que el modelo del dispositivo tiene la APP correcta/el modelo de APP correspondiente correcto; limpie la lente del producto con un hisopo de algodón seco para confirmar si la lente está dañada. (No se recomiendan los hisopos con alcohol).

4P : Carga anormal: después de usarlo durante un periodo de tiempo (meses/medio año), no se puede cargar/no se puede encender después de cargar

A : Ricarica wireless tramite base magnetica: posizionare il dispositivo su un tavolo orizzontale. Se l'indicatore luminoso lampeggia in modo anomalo durante la ricarica, ruotare il corpo del prodotto per verificare se può essere caricato normalmente. Se il contatto è scadente e l'utilizzo è stato compromesso, contattare il servizio clienti.

5P : El enlace WiFi es inestable y la conexión se desconecta automáticamente de vez en cuando.

R : El WiFi del producto CUREGO se limita al uso del producto y no puede acceder a Internet. Aparece ""Conectado pero no puede acceder a Internet, si desea cambiar"" y hacer clic en ""No""; si el área de cobertura WiFi es fuerte y la señal del producto se ve afectada por la cobertura WiFi, se recomienda a los usuarios que lo cambien.

6P : Después de usarlo durante un período de tiempo, la luz indicadora se apaga pronto durante la carga y no se enciende.

R : Intente cambiar el cable de datos o cambie el cabezal de carga a carga USB/Type-C directa, gire el producto o vuelva a hacer contacto para probar si el contacto de carga es malo.

7P : Después de usar durante unos meses, la APLICACIÓN muestra que no está conectada después de conectarse al WiFi (no hay problema con la conexión anterior)

R : Vuelva a descargar la APLICACIÓN e intente conectarse y usarla.

Garantía

Todos los productos CUREGO están bajo la garantía de CUREGO durante UN año después de la fecha de la compra original. CUREGO recomienda utilizar productos y accesorios originales adquiridos de nuestra marca para un rendimiento óptimo. El uso de otros cabezales de cepillo puede dañar la pala para el oído y limitar la cobertura de la garantía. Contacta con nuestro correo postventa: cs@curegos.com

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

¿Qué no está cubierto por la garantía?

- Uso de piezas de repuesto no autorizadas o uso no autorizado de la pala para el oído.
- Uso del cabezal del cepillo debido a mal uso, abuso, negligencia, alteración o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluidos escombros, arañazos, desgastes, decoloración o desvanecimiento.

Introduzione e catalogo

Gentile Cliente


Grazie per aver acquistato il nostro prodotto CUREGO. Si prega di leggerlo e conservarlo per riferimenti in qualsiasi momento. Se hai bisogno di aiuto, contatta la nostra email: cs@curegos.com e ci fornisci il modello del tuo prodotto e il numero dell'ordine Amazon/Sitoweb.

Faremo tutto il possibile per garantire che il tuo acquisto sia soddisfatto e risolvere eventuali problemi che incontri. Inoltre, attendiamo con impazienza i vostri preziosi commenti sui nostri prodotti.

Ogni commento sarà valutato da CUREGO.

Contenuto della confezione

Note 3 Pro Max * 1

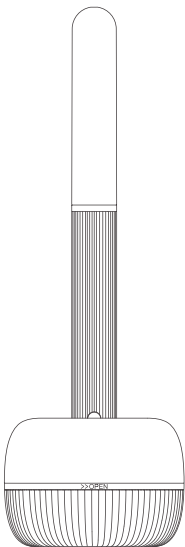

Cuchara de silicona (inferior) * 12



Hisopo de alcohol * 5



Hisopo suavizado * 5



Pinceles pequeños * 1 Enchufe protector * 1



Cavo di ricarica tipo C * 1



Guida dell'operazione

Come connettere all'APP?



- 1 Scansiona il codice QR per scaricare l'APP.



- 2 Aprire l'APP CUREGO e selezionare CUREGO Note 3; Si accende automaticamente all'apertura del coperchio.




- 3 Collegare il prodotto WiFi "curego-XXXX"; Torna all'APP CUREGO, premi per iniziare a utilizzare.



- 4 Touch the start button to use it

Come sostituire il cucchiaino per le orecchie?

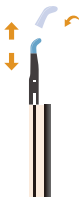

Desatornille el anillo fijo y saque la cuchara vieja. Instale la nueva cuchara para el oído y apriete el anillo fijo. Asegúrese de que la cuchara para el oído esté ensamblada en su lugar antes de usarla para evitar que se caiga.

Istruzioni di sicurezza importanti

Istruzioni prima dell'uso

1. Assicurati che questo prodotto sia stato acquistato dai canali di vendita legali di CUREGO.
2. Questo prodotto può contenere piccole parti. Si consiglia vivamente di tenere questo prodotto lontano da neonati e bambini per evitare il rischio di soffocamento o possibili lesioni.
3. Prima dell'uso, verifica che il prodotto non sia danneggiato o caduto a terra. Se ci sono queste condizioni, si prega di verificare che non influenza l'uso.
4. Si consiglia di conservare questo prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e polvere, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
5. Tieni il prodotto lontano da aree pericolose o dal contatto con fiamme libere o materiali infiammabili.

Disclaimer:

CUREGO non garantisce che i prodotti siano esenti da difetti o danni causati da trasporto, stoccaggio, installazione improprio, ambiente interno o esterno ostile, uso improprio, abuso, negligenza, incidenti, modifiche, manomissioni, accessori accessori non autorizzati e danni ai prodotti, cattiva lavorazione o qualsiasi altra condizione che porti a difetti o malfunzionamenti dei prodotti. L'unica responsabilità di CUREGO è la riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi durante la garanzia. Il periodo di garanzia è previsto che l'acquirente segnali tempestivamente il suddetto guasto per iscritto a CUREGO e si attenga ai termini della garanzia.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Marca :	CUREGO
Nome del prodotto :	Strumento per la pulizia del cerume visivo intelligente
Modello :	Note 3 Pro Max
Peso dell'asta :	128g
Standard di rete :	IEEE802.11b/g/n
Antenna :	antenna FPC interna
Frequenza di lavoro :	2.4Ghz
Velocità di trasmissione dell'immagine :	20fps
Sensore di immagine :	CMOS
Temperatura di lavoro :	14-113°F
Batteria :	batteria al litio da 300 mAh
Utilizzo del tempo dopo una carica completa	70 minuti

Tiempo de carga :	60 minuti
Tensione di ingresso :	DC 5V 0.5A
Diametro dell'obiettivo:	3.5mm
Profondità di campo :	15 ~ 20mm
Pixel :	10 milioni di pixel
Giroscopio :	giroscopio de 360 °

Risoluzione dei problemi

1Q : Il corpo si riscalda durante l'uso

A : L'obiettivo del prodotto è dotato di luce fredda a LED che non è abbagliante. Il prodotto è dotato di un doppio sistema di controllo della temperatura. La temperatura della parte dell'otoscopio è di 25° e la temperatura del palmo del corpo è 32° durante l'uso. Pertanto una leggera febbre durante il funzionamento è normale. La qualità è sicura e puoi usarlo con sicurezza.

2Q : Collegamento anormale

A : [Impossibile cercare il WiFi del prodotto CUREGO-xxxx]
Conferma se il dispositivo è acceso in uno stato normale (l'indicatore anello lampeggia quando il dispositivo è acceso ma non è collegato. È sempre acceso dopo la connessione)

3Q : Visualizzazione anomala dell'APP (sfocatura dell'obiettivo/ macchie appaiono sullo schermo/ lo schermo diventa nero)

R : Disinstallare l'APP e reinstallarla, conferma che il modello del dispositivo abbia l'APP corretta/il modello di APP corrispondente corretto; pulisci l'obiettivo del prodotto con un batuffolo di cotone asciutto per confermare se l'obiettivo è danneggiato. (Si sconsiglia di non usare i tamponi con alcool)

4Q : Ricarica anomala: dopo averla usata per un periodo di tempo (mesi/sei mesi), non può essere caricata o non può essere accesa dopo la ricarica

A : Carga inalámbrica mediante base magnética: coloque el dispositivo sobre una mesa horizontal. Si la luz indicadora parpadea de forma anormal durante la carga, gire el cuerpo del producto para comprobar si se puede cargar normalmente. Si el contacto es deficiente y el uso se ha visto afectado, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

5Q : Il collegamento WiFi è instabile e la connessione viene disconnessa automaticamente frequentemente

A : Il Wi-Fi dei prodotti CUREGO è limitato all'uso del prodotto e non può accedere a Internet. Viene visualizzato il messaggio "Connesso ma non è possibile accedere a Internet, se cambiare" e fare clic su "No". Se l'area di copertura Wi-Fi è forte e il segnale del prodotto è influenzato dalla copertura Wi-Fi, si consiglia di provare a utilizzarlo in alternativa ambiente.

6Q : Dopo aver usato per un periodo di tempo, l'indicatore si spegnerà presto durante la ricarica e non si accenderà

A : Prova a cambiare il cavo o cambia la testina di ricarica per la ricarica USB/Type-C diretta, gira il dispositivo per capire se il contatto di ricarica è difettoso.

7Q : Dopo aver usato per alcuni mesi, l'APP mostra che non è connessa dopo la connessione al WiFi (non ci sono problemi con la connessione precedente)

A : Ricarica l'APP e prova a connetterla e usarla.

Garanzia

Tutti i prodotti CUREGO sono coperti dalla garanzia CUREGO per UN anno dalla data di acquisto originale. CUREGO consiglia di utilizzare prodotti e accessori originali acquistati dal nostro marchio per prestazioni ottimali. L'uso di altre testine potrebbe danneggiare il tuo auricolare e limitare la copertura della garanzia. Contatta la nostra email post-vendita: cs@curegos.com

ESCLUSIONI DI GARANZIA

Cosa non è coperto dalla garanzia?

- Utilizzo di parti di ricambio non autorizzate o Utilizzo non autorizzato della paletta per l'orecchio.
- Utilizzo della testina a causa di uso improprio, abuso, negligenza, alterazione o riparazioni non autorizzate.
- Normale usura, inclusi detriti, graffi, scolorimento o sbiadimento.

紹介と目次

お客様

CUREGO製品をご購入いただきありがとうございます。この取扱説明書をよく読んでください。将来の参考になるように大切に保管してください。何かお手伝いが必要な場合は、Eメール：

cs@curegos.comにてご連絡ください。製品型番とアマゾン/注文番号を御提示ください。ご満足いただけるまで、ご質問を対応させていただきます。また、製品について貴重なご意見をいただければ嬉しく存じます。

CUREGOはすべてのレビューを大切にしております。

製品紹介

Note 3 Pro Max*1

シリコン耳スプーン* 12



アルコールスワブ* 5




ソフトスワップ* 5



小さなブラシ*1 保護プラグ*1



Type-C充電ケーブル*1

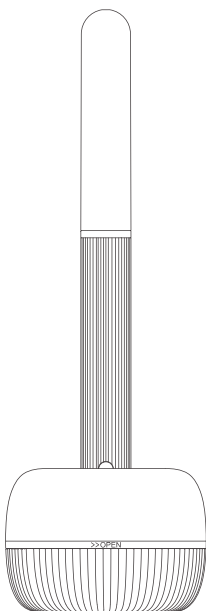

操作ガイド

APPの接続ガイド



- 1 QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。



- 2 CUREGOアプリを開き、CUREGO Note 3を選択します。蓋を開けると自動的に電源を入れます。



- 3 製品WiFi「curego-XXXX」を接続します；CUREGOアプリに戻って、開始を押して使用します。



- 4 Touch the start button to use it

耳の先端を変える方法は？



固定リングを緩め、古いイヤースプーンを引き出します。新しいイヤースプーンを取り付け、固定リングを締めます。脱落を防ぐため、使用する前にイヤースプーンが所定の位置に組み立てられていることを確認してください。

安全上の注意事項

使用前の注意事項

1. 本製品がCUREGOブランド側の合法的な販売ルートから購入されたことをご確認ください。
2. 本製品には小さな部品が含まれている可能性がありますので、窒息危険や可能性のあるダメージが発生しないように、赤ちゃんや子供の手の届かない場所に置いてください。
3. 使用前に製品が破壊・破損しておらず、地面に落ちていないことをご確認ください。もしこのような状況が発生した場合、使用に影響がないことをご確認ください。
4. 本品は日陰の乾燥所に保管してください。湿気とほこりから離れてください。そうでなければ、破損する恐れがあります。
5. 製品を危険エリアから離れてください。火や燃焼しやすい材料から離れてください。

免責声明：(免責説明)

CUREGOは、製品に欠陥や輸送、貯蔵、設置の不適切な損傷、内部または外部の敵対環境、任意の許可されていない付属部品を誤用、乱用、不注意、事故、修正、改ざんすること、製品、プロセス不良、またはその他の条件により製品の欠陥や誤動作が発生することに対して保証できません。CUREGOのこの保証での唯一の責任は、選択した保証期間中に、この期間中に故障した商品の修理または交換です。お客様が直ちに書面でCUREGOに障害を報告し、本保証条項を遵守することを前提としています。

製品仕様

ブランド:	CUREGO
製品名:	スマートビジョン耳垢クリーニングツール
モデル:	Note 3 Pro Max
ボール重量:	128g
ネットワーク規格:	IEEE802.11b/g/n
アンテナ:	内蔵FPCアンテナ
動作周波数:	2.4Ghz
画像伝送速度:	20fps
イメージセンサー:	CMOS
使用温度:	-10-45°C
バッテリー:	batteria al litio da 300 mAh
完全充電後の使用時間:	70分
充電時間:	60分

入力電圧:	DC 5V 0.5A
レンズ径:	3.5mm
被写界深度:	15～20mm
ピクセル:	1000万ピクセル
ジャイロスコープ:	ビエンチャンジャイロスコープ

よくあるご質問

1Q:使用中に本体が発熱します

A: 製品レンズにLED冷光ランプが設置され、まぶしくなく、グレアはありません。製品は二重温度制御システムを採用し、使用中には、耳鏡部分の無感温度は25°で、本体部分の手のひら温度は32°です。そのため、製品の動作中にわずかな発熱が生じるのは正常な現象です。品質は安全で、安心して使用していただけます。

2Q:接続異常

A: [CUREGO-xxxx製品WiFiが検索できません]

デバイスが正常状態でオンになっているかどうかをご確認ください(オンになっているが接続していない場合は、リングランプが点滅し、接続した後ランプは常に点灯します)。

3Q: APP表示異常(レンズボケ/画面がボケます/画面が黒くなります)

A: APPをアンインストールして再インストールしてください。デバイス型番には対応する正しいAPP/正しい対応するAPP型番があることをご確認ください。乾燥の綿棒でレンズをきれいに拭いて、レンズが破損しているかどうかをご確認ください。(アルコール綿棒はお勧めしません)。

4Q:充電異常:しばらく使用した後(数ヶ月/半年)充電できなくなりあまず/充電後も電源を入れられません。

A: 【磁気吸引ベースワイヤレス充電】デバイスを水平に置き、充電中にランプが異常に点滅する場合、本体を回転させて正常に充電できるかどうかを試してみてください。接触不良の場合はアフターサービスを求めるために、カスタマーサービスにご連絡ください。

5Q: WiFi接続が不安定で、自動的に接続が切断されることがあります

A: CUREGO製品のWiFiは製品の使用のみでき、インターネットにアクセスできません。「接続されているがインターネットにアクセスできない。切り替えるか」と表示されると、「いいえ」をクリックしてください。インターネット接続できないWiFiはWiFiカバーエリアでの信号が製品WiFiの使用に強く影響している場合は、使用環境を交換してみてください。

6Q: しばらく使用した後、充電中にランプがまもなく消灯し、電源を入れることができません

A: データケーブルを交換してみてください。或いは充電ヘッドで直接USB/Type-C充電を使用してみてください。回転させたり、再接続したりして、充電接触不良かどうかをご確認ください。

7Q: 数ヶ月使用した後、WiFi接続後にアプリに接続されていないと表示されます(これまでの接続や使用には問題ありません)

A: アプリを再ダウンロードして接続してみてください。

保証

すべてのCUREGO製品は、最初の購入日から1年間CUREGOの保証が適用されます。CUREGOは、最適なパフォーマンスを得るために、当社のブランドから購入した純正の製品とアクセサリを使用することをお勧めします。他のブラシヘッドを使用すると、耳かきが損傷し、保証範囲が制限される場合があります。アフターセールスメールに連絡してください：cs@curegos.com

保証の除外

保証の対象とならないものは何ですか？

- 許可されていない交換部品の使用または耳かきの許可されていない使用。
- 誤用、乱用、怠慢、改ざん、または不正な修理によるブラシヘッドの使用。
- 破片、引っかき傷、擦り傷の変色または退色を含む通常の損耗。