

Lactation Massager

- EN -



User Manual
Model No.: EHL038

Healthcare-Manager.com

EHL038
V01: 20230105

User Manual (EN)	01-09
Benutzerhandbuch (DE)	10-19
Manuale d'Uso (IT)	20-29
Manuel d'utilisation (FR)	30-39
Manual de Usuario (ES)	40-49
Gebruikershandleiding (NL)	50-59

Contents

Overview	01
Prior to Use	02
How to use	02
What's in the box	05
Charging your massager	05
Specifications	06
Cleaning and storage	06
Environmental condition for normal working transport and storage	07
Important information	07
Warning	07
Warranty	08
Q&A	08
EMC information	08
Explanation of symbols	09

Overview

Easy@Home Lactation Massager EHL038 is a handheld lactation massager covered in soft silicone, which makes your breastfeeding experience more enjoyable. Eliminate clogged ducts, increase the speed of milk letdown and milk flow, and reduce discomfort from engorgement.

The massager has 10 vibration modes and 2 heating modes. It can relieve pain and discomfort and increase milk flow. You can also take it anywhere you go since it's so small and compact.

Additionally, it's waterproof, so you can use it in the shower (where the warm water may also help get the milk moving and clear the blockage).

Prior to Use

Before using your Lactation Massager, here are a few simple steps to ensure you have the best session.

1. Allow a few minutes for the massager to reach full heat. It is recommended to pre-heat the massager before pumping by using the heat only setting.
2. Explore different positions of the massager on your breast.
3. Wear a tight-fitting nursing/pumping bra to provide best compression. This massager will be optimized to provide constant and gentle heat throughout your breastfeeding or pumping session.

Note: Do NOT use if you have an allergy to silicone.

How to use

1. Product components:

- (1)  Vibration Mode Button


Press and hold for 3 seconds to turn on/off.
Press button quickly to switch vibration modes.

- (2)  Heating Mode Button

Press and hold for 3 seconds to turn on/turn off.
Press button quickly to switch heating modes.

2. Two heating modes:


Purple light means low heat and red light means high heat.

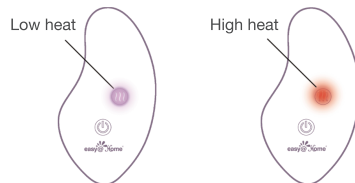


Note: The heating function will be turned off automatically after 30 minutes.

3. Diagram of vibration modes:

The below diagram shows ten vibration modes' impulse patterns. Press the vibration mode button briefly until you find the mode that works best for you.

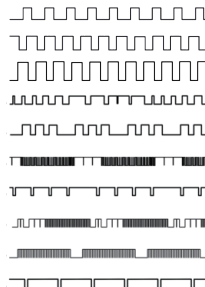

4. Explanation picture of massager

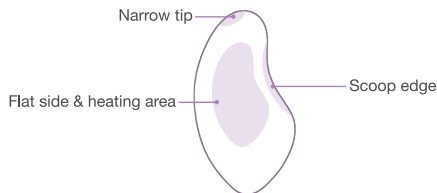

Procedure:

Step 1. Turn on the heating function. A quick rise in skin temperature will increase blood circulation to the targeted area, and increase stimulation for faster let-down and increased milk flow.

*** Note: Make sure to start with low heat to check your skin's sensitivity to heat and switch to high heat mode if necessary.**

Step 2. Press the vibration mode button to turn on massager then choose a comfortable vibration mode.

Step 3. Use the flat side of the massager to rub breast with appropriate pressure until you feel a little push, from around of breast toward the nipple. If the breastfeeding let-down does not work perfectly, you can use the scoop edge to massage different parts of breast. The scoop edge has a narrower contact area than flat side so it will provide a stronger stimulation and pressure to guide the milk.


Step 4. Use the narrow tip of the massager massaging clogged ducts during breast feeding or milk pumping.

NOTE:

To avoid burning skin, do not use heating mode for more than 10 minutes in one area. Keep moving the massager positions on your breast to avoid a single area from overheating. If the massager is too hot for skin, stop using immediately.

What's in the box

- 1* Lactation Massager
- 1* USB charging cord
- 1* Storage bag
- 1* Manual

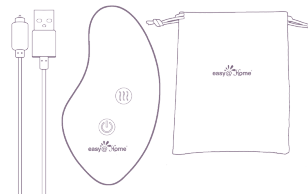


Charge your massager

1. The vibration mode button will blink a purple light when the battery needs to be charged, which indicates 10 minutes of battery life remain.
2. A bright purple steady light means fully charged. It takes 2.5-3 hours for a full charge.
3. Place the massager on a desk or flat area to make sure that the plug will not come loose when charging. Do not plug in too hard or the charging cord can be damaged.

NOTE:

1. Ensure the charging cord firmly attaches to the massager for charging.
2. To ensure the use time of the massager can reach 120 min or full capacity, please use after fully charged.

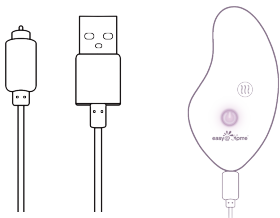

Specifications

Usage Time: 120min for continuously using after battery fully charged

Size: 110 mm*60 mm*41mm

Battery Capacity: 750 mAh

Weight: 122g

Color: Purple

Modes: 10 vibration modes & 2 heat levels

Heating Temperature: 42°C~45°C (107.6°F~113°F)

Charging Electric Current: 370mA

Service Life: 3 years

Cleaning and storage

- ALWAYS clean your massager before and after every use.
- Unplug the charging cord before cleaning.
- Clean with mild soap and warm water. Do NOT submerge in water.
- Air dry naturally and avoid direct sunlight.
- Store in a dry and dust-free place.

Environmental condition for normal working transport and storage

- Normal working ambient temperature: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
- Normal working ambient humidity: 40% ~ 70%RH
- Transport and storage ambient temperature: -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
- Transport and storage ambient humidity: 15% ~ 90%RH
- Atmospheric pressure: 70kPa - 102kPa

Important information

- Do not use while charging.
- Keep away from water when charging.(But it can be used in shower after fully charged.)
- Unplug the cable before cleaning.
- Do not touch plug with wet hands.
- Keep away from young children.
- Avoid using the massager if it is damaged.

Warning

Your safety is critical to us. However, burns may result from improper use. To reduce the risk of burn or any harm, this product must be used in accordance with the following instructions.

- Do not use while sleeping.
- Do not use on an infant.
- Do not use on skin (like back or abdomen) where you feel temperature insensitively or you will be burnt unconsciously if the massager's temperature is too hot.
- Do not use if the internal heating element is exposed.
- Start with low heat and pay attention to your skin sensitivity level. Also do not use in one area longer than 10 minutes at a time (as mentioned in the procedure portion of this manual).

Warranty

This product includes a 1-year warranty after the date of original purchase, against defects due to faulty manufacturing or materials. The warranty does not cover appearance abrasion caused by wear and tear or damage caused by accident, misuse, or negligence or theft. Please note, any attempt to open or take apart the device will void the warranty.

Q&A

Q1: Can the massager get wet if I want to use it in the shower?

A: You can operate the massager in the shower because it has IPX7 waterproof and covered in silicone. However, please do not submerge in liquid/water to maintain life span. Also, please dry the massager after use.

Q2: I have an allergy to silicone. Can I use the massager?

A: We highly suggest those who have allergy to silicone DO NOT use this massager. If you do get itching, swollen bumps or rashes over the skin after using this device for a silicone allergy or any adverse reaction, please visit a doctor as soon as possible.

EMC information

The product conforms to test standard(s):

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

BS EN IEC 55014-1:2021

BS EN IEC 55014-2:2021

Explanation of symbols

	Recyclable		Manufacturing date		Batch code
	Humidity limitation of 15% ~ 90%		Atmospheric pressure limitation of 70kPa ~ 102kPa		Temperature limit of -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
	Keep out of reach of children		Manufacturer		UKCA marking of conformity
	CE marking of conformity		Authorized representative in the European Community		Authorized representative in the United Kingdom
	Refer to instruction manual		WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		

Healthcare-Manager.com

Questions or Comments?

E-mail: service@healthcare-manager.com

Easy Healthcare Corporation

360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527

Made in China



Scan the code to get the manual in more languages



Laktations-Massagegerät

- DE -



Benutzerhandbuch
Modell-Nr.: EHL038

Inhalt

Übersicht.....	11
Vor der Verwendung	12
Verwendung	12
Lieferumfang	15
Laden Sie Ihr Massagegerät auf	15
Spezifikationen	16
Reinigung und Lagerung	16
Umgebungsbedingungen für normalen Betrieb, Transport und Lagerung	17
Wichtige Informationen	17
Warnung	17
Garantie.....	18
FRAGEN UND ANTWORTEN.....	18
EMC-Informationen.....	18
Erläuterung der Symbole	19

Übersicht

Das Easy@Home Laktations-Massagegerät EHL038 ist ein handgehaltenes, mit weichem Silikon überzogenes Massagegerät, das Ihre Still Erfahrung angenehmer macht. Beseitigen Sie verstopfte Milchgänge, beschleunigen Sie den Milcheinschuss und den Milchfluss und reduzieren Sie die Beschwerden bei Verstopfung.

Das Massagegerät hat 10 Vibrationsmodi und 2 Heizmodi. Es kann Schmerzen und Unwohlsein lindern und den Milchfluss steigern. Sie können es auch überall hin mitnehmen, da es so klein und kompakt ist. Außerdem ist er wasserdicht, so dass Sie ihn auch unter der Dusche verwenden können (wo das warme Wasser ebenfalls dazu beiträgt, die Milch in Bewegung zu bringen und die Verstopfung zu lösen).

Vor der Verwendung

Bevor Sie Ihr Laktations-Massagegerät verwenden, sollten Sie ein paar einfache Schritte beachten, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten.

1. Ein paar Minuten warten, bis das Massagegerät seine volle Wärme erreicht hat. Es wird empfohlen, das Massagegerät vor dem Pumpen mit der Einstellung "Nur Wärme" vorzuwärmen.
2. Erkunden Sie verschiedene Positionen des Massagegeräts auf Ihrer Brust.

3. Einen eng anliegenden Still-/Pump-BH tragen, um eine optimale Kompression zu gewährleisten.

Dieses Massagegerät ist so optimiert, dass es während des Stillens oder Abpumpens konstante und sanfte Wärme abgibt.

Hinweis: NICHT verwenden, wenn Sie eine Allergie gegen Silikon haben.

Verwendung

1. Produktbestandteile:

- (1)  Vibrationsmodus-Taste


Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Taste schnell, um den Vibrationsmodus zu wechseln.

- (2)  Heizmodus-Taste

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Taste schnell, um den Heizmodus zu wechseln.

2. Zwei Heizmodi:


Violettes Licht bedeutet geringe Hitze und rotes Licht bedeutet hohe Hitze.

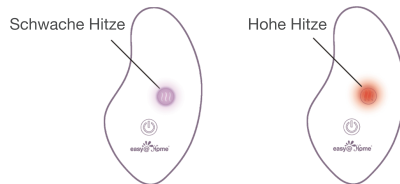


Hinweis: Die Heizfunktion schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.

3. Diagramm der Schwingungsformen:

Das folgende Diagramm zeigt die Impulsmuster von zehn Vibrationsmodi. Drücken Sie die Taste für den Vibrationsmodus kurz, bis Sie den Modus gefunden haben, der für Sie am besten funktioniert.

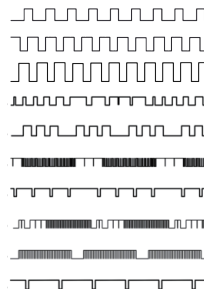

4. Erläuterung Bild des Massagegeräts

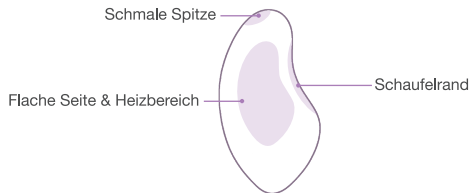

Verfahren:

Schritt 1. Schalten Sie die Heizfunktion ein. Ein schneller Anstieg der Hauttemperatur steigert die Blutzirkulation im Zielbereich und erhöht die Stimulation für eine schnellere Entleerung und einen stärkeren Milchfluss.

*** Hinweis: Beginnen Sie mit geringer Hitze, um die Empfindlichkeit Ihrer Haut zu testen.**

Zum Aufheizen und schalten Sie gegebenenfalls auf hohen Heizbetrieb um.

Schritt 2. Drücken Sie die Taste für den Vibrationsmodus, um das Massagegerät einzuschalten, und wählen Sie dann einen angenehmen Vibrationsmodus.

Schritt 3. Verwenden Sie die flache Seite des Massagegeräts, um die Brust mit angemessenem Druck zu massieren, bis Sie einen leichten Druck von der Brust in Richtung der Brustwarze spüren. Wenn das Stillen nicht perfekt funktioniert, können Sie die Schaufelkante verwenden, um verschiedene Teile der Brust zu massieren. Die Schaufelkante hat eine schmalere Kontaktfläche als die flache Seite, so dass sie eine stärkere Stimulation und einen stärkeren Druck ausübt, um die Milch zu leiten.


Schritt 4. Verwenden Sie die schmale Spitze des Massagegeräts, um verstopfte Gänge während des Stillens oder Abpumpens zu massieren.

HINWEIS:

Um Hautverbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Heizmodus nicht länger als 10 Minuten an einer Stelle verwenden. Wechseln Sie die Position des Massagegeräts auf Ihrer Brust, um eine Überhitzung eines einzelnen Bereichs zu vermeiden. Wenn das Massagegerät zu heiß für die Haut ist, beenden Sie die Anwendung sofort.

Lieferumfang

- 1* Laktations-Massagegerät
- 1* USB-Ladekabel
- 1* Aufbewahrungstasche
- 1* Handbuch

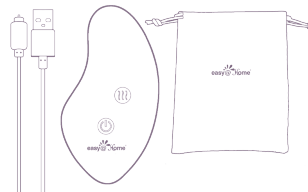


Laden Sie Ihr Massagegerät auf

1. Die Taste für den Vibrationsmodus blinkt lila, wenn der Akku aufgeladen werden muss, was bedeutet, dass noch 10 Minuten Akkulaufzeit verbleiben.
2. Ein helles violettes Dauerlicht bedeutet, dass das Gerät vollständig geladen ist. Es dauert 2,5-3 Stunden für eine volle Ladung.
3. Stellen Sie das Massagegerät auf einen Tisch oder eine ebene Fläche, um sicherzustellen, dass sich der Stecker beim Aufladen nicht löst. Stecken Sie den Stecker nicht zu fest ein, sonst kann das Ladekabel beschädigt werden.

HINWEIS:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel zum Aufladen fest mit dem Massagegerät verbunden ist.
2. Um sicherzustellen, dass die Nutzungszeit des Massagegeräts kann 120min oder volle Kapazität zu erreichen, verwenden Sie bitte nach voll aufgeladen.

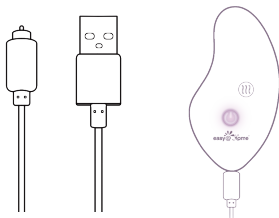

Spezifikationen

Nutzungsdauer: 120 Minuten bei kontinuierlicher Nutzung nach vollständiger Aufladung des Akkus

Größe: 110 mm*60 mm*41mm

Batteriekapazität: 750 mAh

Gewicht: 122g

Farbe: Lila

Modi: 10 Vibrationsmodi und 2 Heizstufen

Heizung Temperatur: 42°C~45°C (107,6°F~113°F)

Elektrischer Ladestrom: 370mA

Nutzungsdauer: 3 Jahre

Reinigung und Lagerung

- Reinigen Sie Ihr Massagegerät IMMER vor und nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Ladekabels.
- Mit milder Seife und warmem Wasser reinigen. NICHT in Wasser eintauchen.
- An der Luft trocknen lassen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- An einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahren.

Umweltbedingungen für den normalen Betrieb, Transport und Lagerung

- Normale Arbeitsumgebungstemperatur: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
- Normale Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit: 40% - 70%RH
- Transport- und Lagerumgebungstemperatur: -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Transport und Lagerung: 15% ~ 90%RH
- Atmosphärischer Druck: 70kPa - 102kPa

Wichtige Informationen

- Nicht während des Ladens verwenden.
- Halten Sie das Gerät beim Aufladen von Wasser fern. (Allerdings kann es in der Dusche verwendet werden, nachdem es vollständig aufgeladen wurde).
- Ziehen Sie das Kabel vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Von kleinen Kindern fernhalten.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Warnung

Ihre Sicherheit ist für uns von entscheidender Bedeutung. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es jedoch zu Verbrennungen kommen. Um das Risiko von Verbrennungen oder anderen Schäden zu verringern, muss dieses Produkt in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen verwendet werden.

- Nicht im Schlaf anwenden.
- Nicht bei Kleinkindern anwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hautstellen (z. B. Rücken oder Bauch), an denen Sie die Temperatur unempfindlich spüren, da Sie sich sonst unbewusst verbrennen, wenn die Temperatur des Massagegeräts zu hoch ist.
- Nicht verwenden, wenn das interne Heizelement freiliegt.
- Beginnen Sie mit geringer Hitze und achten Sie auf die Empfindlichkeit Ihrer Haut. Wenden Sie das Gerät auch nicht länger als 10 Minuten am Stück an (wie im Abschnitt "Verfahren" in diesem Handbuch beschrieben).

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 1 Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Defekte aufgrund von Herstellungs- oder Materialfehlern. Die Garantie erstreckt sich nicht auf optische Abnutzung durch Verschleiß oder Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Diebstahl verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass jeder Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu zerlegen, zum Erlöschen der Garantie führt.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F1: Kann das Massagegerät nass werden, wenn ich es unter der Dusche verwenden möchte?

A: Sie können das Massagegerät in der Dusche verwenden, da es IPX7 wasserdicht und mit Silikon überzogen ist. Bitte tauchen Sie es jedoch nicht in Flüssigkeit/Wasser ein, um die Lebensdauer zu verlängern. Auch, bitte trocknen Sie das Massagegerät nach Gebrauch.

F2: Ich habe eine Allergie gegen Silikon. Kann ich das Massagegerät verwenden?

A: Wir empfehlen dringend, dass diejenigen, die eine Allergie gegen Silikon haben, dieses Massagegerät NICHT verwenden. Wenn Sie Juckreiz, geschwollene Beulen oder Ausschläge über die Haut nach der Verwendung dieses Geräts für eine Silikon-Allergie oder eine unerwünschte Reaktion bekommen, besuchen Sie bitte einen Arzt so schnell wie möglich.

EMC-Information

Das Produkt entspricht der/den Prüfnorm(en):

ENIEC 55014-1:2021

ENIEC 55014-2:2021

BS EN IEC 55014-1:2021

BS EN IEC 55014-2:2021

Erläuterung der Symbole

	Wiederverwertbar		Datum der Herstellung		Code der Charge
	Luftfeuchtigkeitsbeschränkung von 15% ~ 90%		Atmosphärische Druckbegrenzung von 70kPa ~ 102kPa		Temperaturgrenze von -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren		Hersteller		UKCA-Kennzeichnung von Konformität
	CE-Kennzeichnung der Konformität		Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft		Bevollmächtigter Vertreter im Vereinigten Königreich
	Siehe Anleitung Handbuch		WEEE (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)		

Healthcare-Manager.com

Fragen oder Kommentare?

E-mail: service@healthcare-manager.com

Easy Healthcare Corporation

360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527

Made in China



Scannen Sie den Code, um das Handbuch in mehreren Sprachen zu erhalten



easy@Home[®]

www.healthcare-manager.com

Massaggiatore per l'Allattamento

- IT -



Manuale d'Uso
Modello N.: EHL038

Indice

Panoramica Generale.....	21
Prima dell' Uso	22
Come si usa	22
Contenuto della confezione	25
Ricaricare il massaggiatore	25
Specifiche tecniche.....	26
Pulizia e stoccaggio	26
Condizioni ambientali per uso normale, trasporto e stoccaggio	27
Informazioni importanti	27
Avvertenze	27
Garanzia	28
Domande&Risposte	28
Informazioni EMC.....	28
Spiegazione dei simboli	29

Panoramica Generale

Il Massaggiatore per l'Allattamento della Easy@Home EHL038 è un massaggiatore per l'allattamento portatile ricoperto di morbido silicone, in grado di rendere più piacevole l'esperienza dell'allattamento. Elimina i dotti intasati, aumenta la velocità del flusso e dell'uscita del latte e riduce il disagio da ingorghi.

Il massaggiatore è dotato di 10 modalità di vibrazione e di 2 modalità di riscaldamento. Riesce ad alleviare il dolore e il disagio ed aumenta il flusso del latte. Potrete anche portarlo con voi dappertutto dato che è davvero piccolo e compatto.

Inoltre esso è impermeabile, dunque potrete usarlo nella doccia (dove l'acqua calda potrà aiutarvi a far muovere il latte e ad eliminare le ostruzioni).

Prima dell' Uso

Prima di usare il vostro Massaggiatore per l'Allattamento, ecco alcune semplici cose per fare in modo che la vostra esperienza risulti migliore.

1. Consentite al massaggiatore di scaldarsi per qualche minuto in modo che raggiunga una temperatura ottimale. Si consiglia un pre-riscaldamento del massaggiatore prima del pompaggio usando le impostazioni per il solo riscaldamento.

2. Esplorate varie posizioni del massaggiatore sul vostro seno.

3. Indossate un reggiseno aderente per l'allattamento per fornire il massimo della compressione.

Questo massaggiatore sarà ottimizzato per fornire un calore delicato ma costante per l'intera durata del vostro allattamento.

Nota Bene: NON usare in caso abbiate allergia al silicone.

Come si usa

1. I componenti del prodotto:

(1)  Tasto Modalità Vibrazione

Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere.

Premere il tasto velocemente per cambiare le modalità di vibrazione.


(2)  Tasto Modalità Riscaldamento

Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere.

Premere velocemente il tasto per cambiare le modalità di riscaldamento.

2. Due modalità di riscaldamento:


La luce viola indica un calore basso e quella rossa un calore alto.

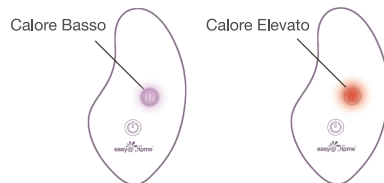


Nota Bene: La funzione riscaldamento si disattiverà automaticamente dopo 30 minuti.

3. Diagramma delle modalità di vibrazione:

Il diagramma qui sotto mostra i modelli di impulso delle dieci modalità di vibrazione. Premete brevemente il tasto delle modalità di vibrazione fin quando non trovate la modalità che va meglio per voi.

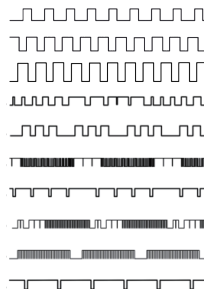

4. Immagine di spiegazione del massaggiatore

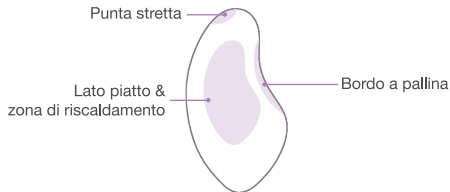

Procedura:

Passo 1. Avviare la funzione riscaldamento. Un rapido aumento della temperatura cutanea farà aumentare la circolazione sanguigna nella zona interessata e nel contempo stimolerà la fuoriuscita ed il flusso del latte.

*** Nota Bene:** Assicuratevi di partire con un calore basso per mettere alla prova la vostra sensibilità cutanea al calore e se necessario passate ad un calore maggiore.

Passo 2. Premere il tasto della modalità delle vibrazioni per avviare il massaggiatore e poi scegliere la modalità di vibrazione per voi più comoda.

Passo 3. Usare il lato piatto del massaggiatore per strofinare il seno con una pressione adeguata fin quando non sentite una leggera spinta provenire dai dintorni del seno in direzione del capezzolo. Se l'allattamento al seno non funziona perfettamente, potete usare il bordo a pallina per massaggiare varie parti del seno. Il bordo a pallina dispone di una zona di contatto più stretta e dunque fornirà una stimolazione ed una pressione maggiore per guidare il latte.


Passo 4. Usare la punta stretta del massaggiatore per massaggiare i dotti intasati durante l'allattamento.

NOTA BENE:

Per evitare che la pelle si ustioni, non usare la modalità riscaldamento per più di 10 minuti alla volta nella stessa zona. Continuate a spostare le posizioni del massaggiatore sul vostro seno per evitare che una zona si surriscaldi. Se il massaggiatore fosse troppo caldo per la pelle, smettere subito di usarlo.

Contenuto della confezione

- 1* Massaggiatore per l'Allattamento
- 1* Cavo USB per ricarica
- 1* Custodia
- 1* Manuale

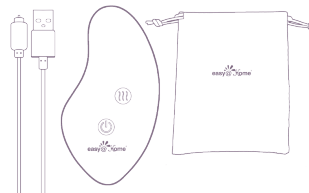


Ricaricare il vostro massaggiatore

1. Il tasto delle modalità di vibrazione lampeggerà in viola quando la batteria abbisogna della ricarica, il che indica che restano 10 minuti di carica alla batteria.
2. Una luce viola fissa significa che la batteria è stata caricata del tutto. Ci vogliono 2.5-3 ore per una ricarica completa.
3. Posizionare il massaggiatore su una scrivania o su un'area piana per assicurarsi che la spina non si stacchi in ricarica. Non spingere troppo la spina altrimenti il cavo per la ricarica potrebbe danneggiarsi.

NOTA BENE:

1. Assicurarsi che il cavo per la ricarica sia ben connesso al massaggiatore.
2. Per essere sicure che l'utilizzo del massaggiatore possa arrivare a 120 minuti, usarlo solo quando è stato caricato del tutto.

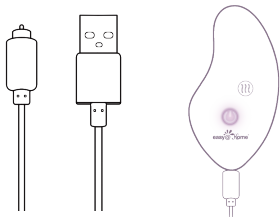

Specifiche tecniche

Tempo di Utilizzo: 120min per uso continuo con batteria completamente carica

Dimensioni: 110 mm*60 mm*41mm

Capacità Batteria: 750 mAh

Peso: 122g

Colore: Viola

Modalità: 10 modalità di vibrazione & 2 livelli di riscaldamento

Temperature Riscaldamento: 42°C~45°C (107,6°F~113°F)

Corrente Elettrica di Ricarica: 370mA

Durata Prevista: 3 Anni

Pulizia e stoccaggio

- Pulire SEMPRE il massaggiatore prima e dopo ogni utilizzo.
- Scollegare il cavo per la ricarica prima della pulizia.
- Pulire usando del sapone neutro ed acqua calda. NON immergere in acqua.
- Asciugare all'aria naturalmente ed evitare la luce solare diretta.
- Riporre in un luogo asciutto privo di polvere.

Condizioni ambientali per funzionamento normale, trasporto e stoccaggio

- Temperature ambientali normali di funzionamento: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
- Umidità ambientale normale di funzionamento: 40% - 70%RH
- Temperature ambientali per trasporto e stoccaggio: -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
- Umidità ambientale per trasporto e stoccaggio: 15% ~ 90%RH
- Pressione atmosferica: 70kPa - 102kPa

Informazioni importanti

- Non usare mentre è in ricarica.
- Tenere lontano dall'acqua mentre è in ricarica. (Si può però usare in doccia quando la carica è stata completata.)
- Scollegare il cavo per ricarica prima di pulirlo.
- Non toccare la spina con le mani umide.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare di usare il massaggiatore se fosse danneggiato.

Avvertenze

Per noi è fondamentale essere sicuri della vostra sicurezza. Tenete presente che è possibile si verifichino delle ustioni in caso di uso improprio. Per ridurre il rischio di ustioni o di danni, questo prodotto deve essere usato seguendo le seguenti istruzioni.

- Non usare mentre si dorme.
- Non usare su un infante.
- Non usare sulla pelle (come l'addome o la schiena) dove si sente la temperatura in modo insenso o dove potrete subire ustioni inconsapevolmente se la temperatura del massaggiatore fosse troppo elevata.
- Non usare qualora l'elemento del riscaldamento interno fosse esposto.
- Iniziare con un calore basso facendo attenzione al livello di sensibilità della vostra pelle. Inoltre non usare su una zona per più di 10 minuti alla volta (come specificato nella parte dedicata alla procedura in questo manuale).

Garanzia

Questo prodotto dispone di una garanzia di 1 anno a partire dalla data di acquisto originale, riguardo ad eventuali difetti di fabbricazione o dei materiali. La garanzia non si applica per eventuali abrasioni causate dall'usura o a danni causati da incidenti, usi impropri o negligenza o furti. Per cortesia prendere nota che qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo renderà nulla la garanzia.

Domande&Risposte

D1: Si può bagnare il massaggiatore se lo volessi usare nella doccia?

R: Potete usare il massaggiatore in doccia perché esso dispone dell'impermeabilizzazione IPX7 ed è ricoperto da silicone. Però non va immerso nell'acqua o in liquidi per preservare la sua vita utile. Inoltre, si prega di asciugarlo dopo l'uso.

D2: Soffro di allergia al silicone. Posso usare il massaggiatore?

R: Consigliamo vivamente a chi soffre di allergia al silicone di NON usare questo massaggiatore. Se riscontrate pruriti, protuberanze gonfie o eruzioni cutanee dopo aver usato questo dispositivo a causa di un'allergia al silicone o qualsiasi altra reazione avversa, siete pregate di andare a vedere un medico quanto prima.

Informazioni EMC

Il prodotto è conforme agli standard di prova:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

BS EN IEC 55014-1:2021

BS EN IEC 55014-2:2021

Spiegazione dei simboli

	Riciclabile		Data di Fabbricazione		Codice di Lotto
	Limiti umidità 15% ~ 90%		Limiti Pressione Atmosferica 70kPa ~ 102kPa		Limiti Temperature -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
	Tenere lontano dalla portata dei bambini		Fabbricante		Marchio di conformità UKCA
	Marchio di conformità CE		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea		Rappresentante autorizzato nel Regno Unito
	Fare riferimento al manuale di istruzioni		RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)		

Healthcare-Manager.com

Avete domande o Commenti?

E-mail: service@healthcare-manager.com

Easy Healthcare Corporation

360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527

Made in China



Fare una scansione del codice per ottenere il manuale in altre lingue



Masseur de lactation

- FR -



Manuel d'utilisation
Modèle n°: EHL038

Sommaire

Présentation générale	31
Avant l'utilisation	32
Mode d'emploi	32
Contenu de la boîte	35
Recharge de votre massEUR	35
Spécifications	36
Nettoyage et stockage	36
Conditions environnementales	37
Informations importantes	37
Avertissement	37
Garantie	38
FAQ	38
Informations de CEM	38
Définition des symboles	39

Présentation générale

Le massEUR de lactation Easy@Home EHL038 est un massEUR de lactation portatif couvert de silicone souple, qui rend votre expérience d'allaitement plus agréable. Il permet d'éliminer les canaux obstrués, d'augmenter la vitesse d'éjection ainsi que d'écoulement du lait, et de réduire l'inconfort dû à l'engorgement.

Le massEUR possède 10 modes de vibration et 2 modes de chauffage. Il peut soulager la douleur et l'inconfort et augmenter le débit de lait. Vous pouvez également l'emmener partout où vous allez car il est si petit et compact.

De plus, il est étanche, ce qui vous permet de l'utiliser sous la douche (où l'eau chaude peut également aider à faire circuler le lait et à éliminer les obstructions).

Avant l'utilisation

Avant d'utiliser votre masseur de lactation, voici quelques étapes simples pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience.

1. Attendez quelques minutes pour que le masseur atteigne sa température maximale. Il est recommandé de préchauffer le masseur avant de pomper.
2. Explorez positions différentes avec le masseur sur votre sein.
3. Portez un soutien-gorge d'allaitement/de pompage bien ajusté pour offrir une meilleure compression.

Ce masseur est conçu pour fournir une chaleur constante et douce tout au long de la période d'allaitement ou de pompage.

Remarque : Ne pas l'utiliser si vous êtes allergique au silicone.

Mode d'emploi

1. Boutons du produit:

- (1)  Bouton du mode de vibration

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.

Appuyez rapidement sur le bouton pour changer de mode de vibration.


- (2)  Bouton du mode de chauffage

Appuyez sur le bouton et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.

Appuyez rapidement sur le bouton pour changer de mode de chauffage.

2. Deux modes de chauffage:


La lumière violette signifie une chaleur faible et la lumière rouge une chaleur élevée.

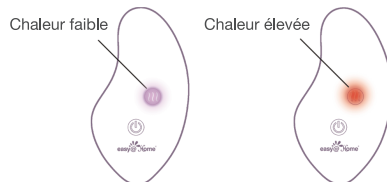


Remarque : La fonction de chauffage s'éteint automatiquement après 30 minutes.

3. Diagramme des modes de vibration:

Le diagramme ci-dessous montre les schémas d'impulsion des dix modes de vibration. Appuyez rapidement sur le bouton du mode de vibration jusqu'à ce que vous trouviez le mode qui vous convient le mieux.

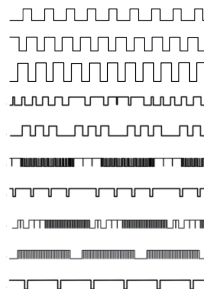

4. Description photographique du masseur

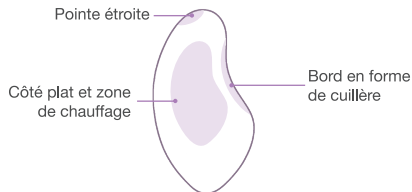

Procédure:

Étape 1. Activez la fonction de chauffage. Une augmentation rapide de la température de la peau accroîtra la circulation sanguine dans la zone ciblée et un écoulement du débit de lait sera plus rapide.

*** Remarque:** Veillez à commencer par une chaleur faible pour contrôler la sensibilité de votre peau à la chaleur et passer au mode de chaleur élevée si nécessaire.

Étape 2. Appuyez sur le bouton du mode de vibration pour allumer le masseur, puis choisissez un mode de vibration confortable.

Étape 3. Utilisez le côté plat du masseur pour frotter le sein avec une pression appropriée jusqu'à ce que vous sentiez une petite poussée, du pourtour du sein vers le mamelon. Si le relâchement de l'allaitement ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser le bord en forme de cuillère pour masser différentes parties du sein. Le bord en forme de cuillère a une surface de contact plus étroite que le côté plat, ce qui permet une stimulation et une pression plus fortes pour canaliser le lait.


Étape 4. Utilisez l'extrémité étroite du masseur pour masser les canaux obstrués pendant l'allaitement ou le pompage du lait.

Remarque:

Pour éviter de brûler votre peau, n'utilisez pas le mode de chauffage pendant plus de 10 minutes sur une même zone. Continuez à déplacer les positions du masseur sur votre poitrine pour éviter qu'une seule zone ne se surchauffe. Si le masseur est trop chaud pour la peau, cessez immédiatement de l'utiliser.

Contenu de la boîte

- 1* Masseur de lactation
- 1* Cordon de recharge USB
- 1* Sac de rangement
- 1* Manuel

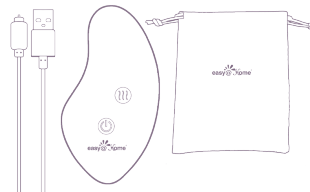


Recharge de votre masseur

1. Le bouton du mode de vibration clignote d'une lumière violette lorsque la batterie doit être rechargée, ce qui indique qu'il reste 10 minutes d'autonomie.
2. Une lumière violette brillante et constante signifie que la batterie est complètement chargée. Il faut 2,5 à 3 heures pour une recharge complète.
3. Placez le masseur sur un bureau ou sur une surface plane pour vous assurer que la fiche ne se détachera pas lors de la recharge. Ne pas brancher trop fort, car le cordon de recharge pourrait alors s'endommager.

Remarque:

1. Veillez à ce que le cordon de recharge soit fermement fixé au masseur pour le recharger.
2. Pour garantir que la durée d'utilisation du masseur peut atteindre 120 minutes ou sa pleine capacité, veuillez l'utiliser après l'avoir complètement rechargé.

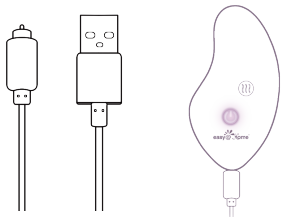

Spécifications

Durée d'utilisation: 120 minutes en utilisation continue après la recharge complète de la batterie.

Taille: 110 mm*60 mm*41mm

Capacité de la batterie: 750 mAh

Poids: 122g

Couleur: violet

Modes: 10 modes de vibration et 2 modes de chaleur

Température de chauffage: 42°C~45°C (107,6°F~113°F)

Intensité du courant de recharge: 370mA

Durée de vie: 3 ans

Nettoyage et stockage

- Nettoyez TOUJOURS votre masser avant et après chaque utilisation.
- Débranchez le cordon de recharge avant le nettoyage.
- Nettoyez l'appareil avec un savon doux et de l'eau chaude. Ne pas l'immerger dans l'eau.
- Séchez le masser à l'air libre et évitez la lumière directe du soleil.
- Stockez le masser de lactation dans un endroit sec et sans poussière.

Conditions environnementales pour l'usage, le transport et le stockage conformes

- Température ambiante normale d'utilisation: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
- Humidité ambiante normale d'utilisation: 40% - 70%RH
- Température ambiante de transport et de stockage: -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
- Humidité ambiante de transport et de stockage: 15% ~ 90%RH
- Pression atmosphérique: 70kPa - 102kPa

Informations importantes

- N'utilisez pas le produit pendant la recharge.
- Tenez à l'écart de l'eau pendant la recharge. (Mais il peut être utilisé sous la douche après avoir été complètement rechargé.)
- Débranchez le câble avant de le nettoyer.
- Ne touchez pas la fiche avec des mains mouillées.
- Tenez-le éloigné des petits enfants.
- Évitez d'utiliser le masser s'il est endommagé.

Avertissement

Votre sécurité est primordiale pour nous. Cependant, des brûlures peuvent résulter d'une utilisation incorrecte. Pour réduire le risque de brûlure ou tout autre dommage, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.

- Ne l'utilisez pas durant le sommeil.
- Ne l'utilisez pas sur un bébé.
- Ne l'utilisez pas sur la peau (comme le dos ou l'abdomen) dont la sensation de la température est insensible et où vous serez brûlé inconsciemment si la température du masser est trop élevée.
- Ne l'utilisez pas si l'élément chauffant interne est exposé.
- Commencez par une chaleur faible et faites attention au niveau de sensibilité de votre peau. N'utilisez pas le produit sur une seule zone pendant plus de 10 minutes à la fois (comme indiqué dans le mode d'emploi de ce manuel).

Garantie

Ce produit dispose d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat initiale, contre tout défaut dû à un vice de fabrication ou de matériau. La garantie ne couvre pas l'abrasion de l'apparence causée par l'usure ou les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, une négligence ou un vol. Veuillez noter que toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil annule la garantie.

FAQ

Q1: Le masseur peut-il être mouillé si je veux l'utiliser sous la douche?

R: Vous pouvez utiliser le masseur sous la douche car il est étanche conformément à la norme IPX7 et couvert de silicone. Cependant, veuillez ne pas l'immerger dans un liquide / l'eau afin de préserver sa durée de vie. Veuillez également sécher le masseur après l'utilisation.

Q2: Je suis allergique au silicone. Puis-je utiliser le masseur?

R: Nous suggérons fortement à ceux qui sont allergiques au silicone de ne pas utiliser ce masseur. Si vous avez des démangeaisons, des protubérances ou des éruptions cutanées sur la peau après avoir utilisé cet appareil pour une allergie au silicone ou toute autre réaction indésirable, veuillez consulter un médecin dès que possible.

Informations de CEM

Le produit est conforme aux normes de test:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

BS EN IEC 55014-1:2021

BS EN IEC 55014-2:2021

Explication des symboles

	Recyclable		Date de fabrication		Code du lot
	Seuil de l'humidité de 15% ~ 90%		Seuil de la pression atmosphérique de 70kPa ~ 102kPa		Seuil de température de -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
	Tenir hors de portée des enfants		Fabricant		Marquage de conformité UKCA
	Marquage de conformité CE		Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Représentant autorisé de au Royaume-Uni
	Consulter le manuel d'utilisation		DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)		

Healthcare-Manager.com

Questions ou commentaires?

E-mail: service@healthcare-manager.com

Easy Healthcare Corporation

360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527

Made in China



Scanner le code pour obtenir le manuel dans plus de langues



Masajeador de Lactancia

- ES -



Manual de Usuario
Modelo No.: EHL038

Contenido

Descripción general	41
Uso Previsto	42
Cómo utilizar	42
Contenido de la caja	45
Cargue su masajeador	45
Especificaciones	46
Limpieza y almacenamiento	46
Condiciones ambientales para el transporte y almacenamiento de trabajo normal ...	47
Información importante.....	47
Advertencia	47
Garantía.....	48
P&R	48
Información sobre EMC	48
Explicación de los símbolos	49

Descripción general

El Masajeador de Lactancia Easy@Home EHL038 es un masajeador de lactancia de mano recubierto de suave silicona, que hace que su experiencia de lactancia sea más agradable. Elimina los conductos obstruidos, aumenta la velocidad de la bajada y el flujo de la leche y reduce las molestias de la congestión.

El masajeador tiene 10 modos de vibración y 2 modos de calentamiento. Puede aliviar el dolor y las molestias y aumentar el flujo de leche. También puede llevarlo a cualquier parte, ya que es muy pequeño y compacto. Además, es resistente al agua, por lo que puede utilizarlo en la ducha (donde el agua caliente también puede ayudar a que la leche se mueva y se elimine la obstrucción).

Uso Previsto

Antes de utilizar el Masajeador de Lactancia, le indicamos unos sencillos pasos para asegurarse de tener la mejor sesión.

1. Espere unos minutos para que el masajeador alcance el calor máximo. Se recomienda usar la configuración de solo calor para precalentar el masajeador antes de bombear.
2. Explore diferentes posiciones del masajeador en su pecho.
3. Utilice un sujetador de lactancia o de bombeo ajustado para proporcionar la mejor compresión.

Este masajeador estará optimizado para proporcionar un calor constante y suave durante toda la sesión de lactancia o extracción de leche.

Nota: NO lo utilice si tiene alergia a la silicona.

Cómo utilizar

1. Componentes del producto:

- (1)  Botón de Modo de Vibración

Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar.
Pulse el botón rápidamente para cambiar los modos de vibración.

- (2)  Botón de Modo de Calefacción

Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar.
Pulse el botón rápidamente para cambiar los modos de calefacción.

2. Dos modos de calentamiento:


La luz púrpura significa calor bajo y la luz roja significa calor alto.




Nota: La función de calentamiento se apagará automáticamente después de 30 minutos.

3. Diagrama de los modos de vibración:

El siguiente diagrama muestra los diez patrones de impulso de los modos de vibración. Pulse brevemente el botón de modo de vibración hasta que encuentre el modo que mejor se adapte a usted.

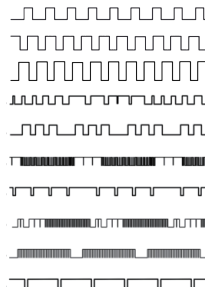

4. Imagen explicativa del masajeador

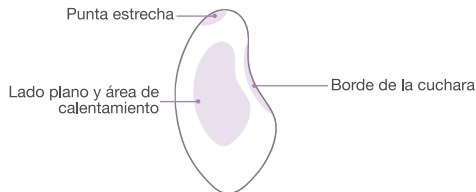

Procedimiento:

Paso 1. Encienda la función de calentamiento. Un rápido aumento de la temperatura de la piel incrementará la circulación sanguínea en la zona deseada, y aumentará la estimulación para lograr una bajada más rápida y un mayor flujo de leche.

*** Nota:** Asegúrese de empezar con un calor bajo para comprobar la sensibilidad de su piel al calor y cambiar al modo de calor alto si es necesario.

Paso 2. Pulse el botón de modo de vibración para encender el masajeador y luego elija un modo de vibración cómodo.

Paso 3. Utilice la parte plana del masajeador para frotar el pecho con la presión adecuada hasta que sienta un pequeño empujón, desde alrededor del pecho hacia el pezón. Si la bajada de la leche materna no funciona perfectamente, puede utilizar el borde de la cuchara para masajear diferentes partes del pecho. El borde de la cuchara tiene un área de contacto más estrecha que el lado plano, por lo que proporcionará una estimulación y una presión más fuertes para guiar la leche.


Paso 4. Utilice la punta estrecha del masajeador para masajear los conductos obstruidos durante la lactancia o la extracción de leche.

NOTA:

Para evitar quemaduras en la piel, no utilice el modo de calentamiento durante más de 10 minutos en una misma zona. Mueva continuamente las posiciones del masajeador en el pecho para evitar que una sola zona se sobrecaliente. Si el masajeador está demasiado caliente para la piel, deje de usarlo inmediatamente.

Contenido de la caja

- 1* Masajeador de Lactancia
- 1* Cable de carga USB
- 1* Bolsa de almacenamiento
- 1* Manual

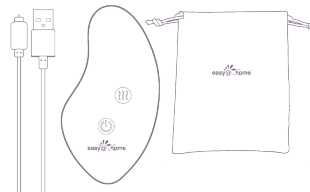


Cargue su masajeador

1. El botón del modo de vibración parpadeará con una luz púrpura cuando la batería necesite ser cargada, lo que indica que quedan 10 minutos de batería.
2. Una luz púrpura brillante y fija significa que está completamente cargado. La carga completa tarda entre 2,5 y 3 horas.
3. Coloca el masajeador sobre un escritorio o una zona plana para asegurarse de que el enchufe no se suelta durante la carga. No lo enchufe con demasiada fuerza. De lo contrario el cable de carga puede dañarse.

NOTA:

1. Asegúrese de que el cable de carga se acopla firmemente al masajeador para cargarlo.
2. Para garantizar que el tiempo de uso del masajeador pueda alcanzar los 120 minutos o la capacidad total, por favor, utilícelo después de haberlo cargado completamente.

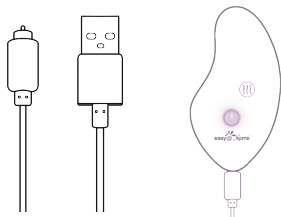

Especificaciones

Tiempo de Uso: 120min para uso continuo después de que la batería esté completamente cargada

Tamaño: 110 mm*60 mm*41mm

Capacidad de la batería: 750 mAh

Peso: 122g

Color: Púrpura

Modos: 10 modos de vibración y 2 niveles de calor

Temperatura de calentamiento: 42°C~45°C (107,6°F~113°F)

Corriente eléctrica de carga: 370mA

Vida útil: 3 años

Limpieza y almacenamiento

- Limpie SIEMPRE su masajeador antes y después de cada uso.
- Desenchufe el cable de carga antes de limpiarlo.
- Límpielo con un jabón suave y agua tibia. NO lo sumerja en agua.
- Seque al aire libre y evite la luz solar directa.
- Guárdelo en un lugar seco y sin polvo.

Condiciones ambientales para el transporte y almacenamiento de trabajo normal

- Temperatura ambiente normal de funcionamiento: 5°C~40°C (41°F~104°F)
- Humedad ambiental normal de funcionamiento: 40%-70%RH
- Temperatura ambiente de transporte y almacenamiento: -10°C~65°C (14°F~149°F)
- Humedad ambiental de transporte y almacenamiento: 15%~90%RH
- Presión atmosférica: 70kPa-102kPa

Información importante

- No utilice durante la carga.
- Manténgase alejado del agua durante la carga. (Pero se puede utilizar en la ducha después de estar completamente cargado).
- Desenchufe el cable antes de limpiarlo.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Manténgalo alejado de los niños pequeños.
- Evite utilizar el masajeador si está dañado.

Advertencia

Su seguridad es fundamental para nosotros. Sin embargo, pueden producirse quemaduras por un uso inadecuado. Para reducir el riesgo de quemaduras o de cualquier daño, este producto debe utilizarse de acuerdo con las siguientes instrucciones.

- No lo utilice mientras duerme.
- No lo utilice en un bebé.
- No lo utilice en pieles (como la espalda o el abdomen) en las que sienta la temperatura de forma insensible o se quemará inconscientemente si la temperatura del masajeador es demasiado alta.
- No lo utilice si el elemento calefactor interno está expuesto.
- Comience con un calor bajo y preste atención al nivel de sensibilidad de su piel. Tampoco lo utilice en una zona durante más de 10 minutos seguidos (como se menciona en la parte de procedimientos de este manual).

Garantía

Este producto incluye una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra original, contra defectos de fabricación o de materiales. La garantía no cubre la abrasión de la apariencia causada por el desgaste o los daños causados por accidente, mal uso o negligencia o robo. Tenga en cuenta que cualquier intento de abrir o desmontar el dispositivo anulará la garantía.

P&R

P1: ¿Puede mojarse el masajeador si quiero utilizarlo en la ducha?

R: Puede utilizar el masajeador en la ducha porque es impermeable IPX7 y está recubierto de silicona. Sin embargo, por favor no lo sumerja en líquido/agua para mantener su vida útil. También, por favor, seque el masajeador después de su uso.

P2: Tengo alergia a la silicona. ¿Puedo utilizar el masajeador?

R: Sugerimos encarecidamente que quienes tengan alergia a la silicona NO utilicen este masajeador. Si después de usar este aparato le pica, se le hinchan los bultos o le salen sarpullidos en la piel por una alergia a la silicona o por cualquier reacción adversa, visite a un médico lo antes posible.

Información sobre EMC

El producto cumple con los estándares de prueba:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

BS EN IEC 55014-1:2021

BS EN IEC 55014-2:2021

Explicación de símbolos

	Reciclable		Fecha de fabricación		Código de lote
	Límite de humedad de von 15% ~ 90%		Límite de presión atmosférica de 70kPa ~ 102kPa		Límite de temperatura de -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
	Mantener fuera del alcance de los niños		Fabricante		Marcado de UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido)
	Marcado CE de conformidad		Representante autorizado en la Comunidad Europea		Representante autorizado en el Reino Unido
	Consulte las instrucciones de uso		RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)		

Healthcare-Manager.com

¿Preguntas o Comentarios?

E-mail: service@healthcare-manager.com

Easy Healthcare Corporation

360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527

Made in China



Escanee el código para obtener el manual en más idiomas



Lactatiemassageapparaat

- NL -



Gebruikershandleiding
Modello N.: EHL038

Inhoud

Overzicht	51
Alvorsens gebruik	52
Hoe te gebruiken	52
Wat zit er in de doos	55
Laad uw massageapparaat op	55
Specificaties	56
Schoonmaak en opbergen	56
Milieuvoorwaarden voor normaal werkend vervoer en opslag	57
Belangrijke informati	57
Waarschuwingen	57
Garantie.....	58
Veelgestelde vragen	58
EMC informatie	58
Uitleg van symbolen	59

Overzicht

Easy@Home Lactatie Massager EHL038 is een draagbare lactatiemassager, bekleed met zachte siliconen, die uw borstvoedingservaring aangenamer maakt. Elimineert de verstopte kanalen, verhoogt de snelheid van de melkafgifte en de melkstroom, en vermindert het ongemak van stuwung. De stimulator heeft 10 vibratiestanden en 2 verwarmingsstanden. Het kan pijn en ongemak verlichten en uw melkstroom verhogen. U kunt hem overal mee naartoe nemen, omdat hij zo klein en compact is. Bovendien is hij waterdicht, dus u kunt hem onder de douche gebruiken (waar het warme water ook kan helpen om de melk in beweging te krijgen en de verstopping op te heffen).

Alvorens gebruik

Voordat u uw Lactatie Massager gebruikt, zijn hier een paar eenvoudige stappen om u te verzekeren van een optimale sessie.

1. Laat het apparaat een paar minuten op temperatuur komen. Het wordt aanbevolen om de stimulator voor te verwarmen voordat u gaat kolven door de warmte stand te gebruiken.

2. Probeer verschillende posities van het apparaat op uw borst.

3. Draag een nauwsluitende borstvoedings-/kolfbeha voor de beste compressie.

Dit massageapparaat wordt geoptimaliseerd om constante en zachte warmte te leveren tijdens uw borstvoedings- of kolfsessie.

Opmerking: NIET gebruiken bij een allergie voor siliconen.

Hoe te gebruiken

1. Product componenten:

(1)  Vibratie stand knop

3 seconden ingedrukt houden om aan/uit te zetten.

Druk snel op de knop om van trilstand te wisselen.

(2)  Warmte stand knop

3 seconden ingedrukt houden om in/uit te schakelen.

Druk snel op de knop om van verwarmingsmodus te wisselen.

2. Twee warmte standen:


Paars licht betekent weinig warmte en rood licht betekent veel warmte.




Opmerking: De verwarmingsfunctie wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.

3. Schema van de trillingsstanden:

Het onderstaande diagram toont de impulspatronen van tien vibratiemodi. Druk kort op de trilstandknop totdat u de stand vindt die voor u het beste werkt.

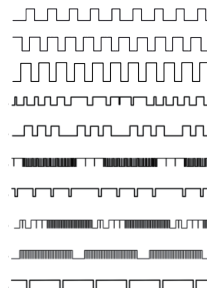

4. Uitleg bij de afbeelding van het massageapparaat

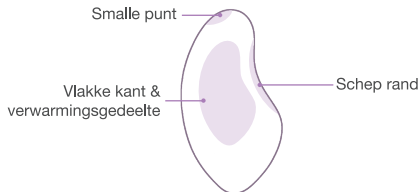

Procedure:

Stap 1. Zet de verwarmingsfunctie aan. Een snelle stijging van de huidtemperatuur verhoogt de bloedcirculatie naar het doelgebied, en verhoogt de stimulatie voor een snellere ontspanning en een grotere melkstroom.

*** Let op: Begin met lage warmte om de gevoeligheid van uw huid te controleren voor warmte en schakel zo nodig over op hoge warmte.**

Stap 2. Druk op de vibratiemodusknop om het apparaat in te schakelen en kies vervolgens een comfortabele vibratiemodus.

Stap 3. Gebruik de platte kant van het massageapparaat om met gepaste druk over de borst te wrijven tot u een duwtje voelt, van om de borst naar de tepel toe. Als de borstvoeding niet perfect werkt, kunt u de scheepkant gebruiken om verschillende delen van de borst te masseren. De lepelrand heeft een smaller contactoppervlak dan de platte kant, zodat hij een sterkere stimulatie en druk geeft om de melk te geleiden.


Stap 4. Gebruik de smalle punt van het massageapparaat om verstopte kanalen te masseren tijdens het voeden of afkolven van melk.

OPMERKING:

Gebruik de verwarmingsmodus niet langer dan 10 minuten op één plek om verbranding van de huid te voorkomen. Blijf de posities van het massageapparaat op uw borst verplaatsen om te voorkomen dat één gebied oververhit raakt. Als het massageapparaat te heet is voor de huid, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

Wat zit er in de doos

- 1* Lactatiemassageapparaat
- 1* USB oplaadkabel
- 1* Opbergtasje
- 1* Handleiding

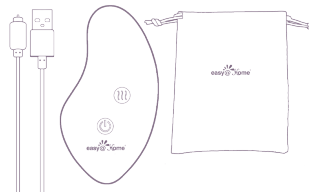


Laad uw massageapparaat op

1. De vibratiemodusknop knippert een paars licht wanneer de batterij moet worden opgeladen, wat aangeeft dat er nog 10 minuten batterijduur over is.
2. Een helder paars licht betekent dat de batterij volledig is opgeladen. Het duurt 2,5-3 uur voor een volledige lading.
3. Plaats het massageapparaat op een bureau of vlakke plek om ervoor te zorgen dat de stekker niet losraakt tijdens het opladen. Niet te hard aansluiten, anders kan het oplaadsnoer beschadigd raken.

OPMERKING:

1. Zorg ervoor dat het oplaadsnoer stevig aan het massageapparaat vastzit voor het opladen.
2. Om de gebruikstijd van het massageapparaat voor 120 minuten te verzekeren of dat het zijn volledig vermogen kan bereiken, gelieve te gebruiken nadat het volledig is opgeladen.

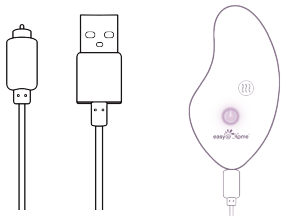

Specificaties

Gebruikstijd: 120min ononderbroken gebruikend na volledig geladen batterij

Grootte: 110 mm*60 mm*41mm

Batterijcapaciteit: 750 mAh

Gewicht: 122g

Kleur: Paars

Modi: 10 vibratie modi & 2 warmte standen

Verwarmingstemperatuur: 42°C~45°C (107,6°F~113°F)

Elektrisch laden: 370mA

Levensduur: 3 jaar

Schoonmaak en opbergen

- Maak uw massageapparaat ALTIJD schoon voor en na elk gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Reinig met milde zeep en warm water. NIET onderdompelen in water.
- Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen aan de lucht en vermijd direct zonlicht.
- Bewaren op een droge en stofvrije plaats.

Milieuvoorwaarden voor normaal werkend vervoer en opslag

- Normale omgevingstemperatuur: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
- Normale werkende omgevingsvochtigheid: 40% - 70%RH
- Vervoer en opslag omgevingstemperatuur: -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
- Vervoer en opslag omringende vochtigheid: 15% ~ 90%RH
- Atmosferische druk: 70kPa - 102kPa

Belangrijke informatie

- Niet gebruiken tijdens het opladen.
- Blijf uit de buurt van water tijdens het opladen. (Maar het kan wel in de douche worden gebruikt nadat het volledig is opgeladen.)
- Haal de kabel uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Houd het apparaat uit de buurt van jonge kinderen.
- Vermijd het gebruik van het massageapparaat als het beschadigd is.

Waarschuwingen

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Brandwonden kunnen echter het gevolg zijn van onjuist gebruik. Om het risico op brandwonden of andere schade te beperken, moet dit product worden gebruikt volgens de volgende instructies.

- Niet gebruiken terwijl u slaapt.
- Niet gebruiken op een zuigeling.
- Niet gebruiken op een huid (zoals rug of buik) waar u de temperatuur ongevoelig aanvoelt of u zult een verhoogde risico hebben op brandwonden als de temperatuur van het apparaat te hoog is.
- Niet gebruiken als het interne verwarmingselement blootligt.
- Begin met een lage temperatuur en let op de gevoeligheid van uw huid. Gebruik ook niet langer dan 10 minuten achtereen op één plek (zoals vermeld in het proceduregedeelte van deze handleiding).

Garantie

Dit product heeft een garantie van 1 jaar na de datum van oorspronkelijke aankoop, tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. De garantie geldt niet voor slijtage of schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, nalatigheid of diefstal. Elke poging om het apparaat te openen of uit elkaar te halen doet de garantie vervallen.

Veelgestelde vragen

Q1: Kan het massageapparaat nat worden als ik het onder de douche wil gebruiken?

A: U kunt de massage apparaat in de douche gebruiken omdat het IPX7 waterdicht is en bedekt met siliconen. Gelieve echter niet onder te dompelen in vloeistof/water om de levensduur te behouden. Ook, gelieve de massageapparaat na gebruik te drogen.

Q2: Ik ben allergisch voor siliconen. Kan ik het massageapparaat gebruiken?

A: Wij raden degenen die allergisch zijn voor siliconen ten eerste aan dit apparaat NIET te gebruiken. Als u jeuk, gezwollen bulten of uitslag op de huid krijgt na gebruik van dit apparaat voor een siliconenallergie of een andere bijwerking, bezoek dan zo snel mogelijk een arts.

EMC informatie

Het product voldoet aan de testnorm(en):

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

BS EN IEC 55014-1:2021

BS EN IEC 55014-2:2021

Uitleg van Symbolen

	Recyclebaar		Productie datum		Batch code
	Vochtigheidsbeperking 15% ~ 90%		Atmosferische drukbeperking van 70kPa ~ 102kPa		Temperatuurlimiet van -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
	Uit de buurt van kinderen houden		Fabrikant		UKCA-markering van Conformiteit
	CE-markering van conformiteit		Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap		Geautoriseerde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk
	Raadpleeg de instructie handleiding		AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)		

Healthcare-Manager.com

Vragen of opmerkingen?

E-mail: service@healthcare-manager.com

Easy Healthcare Corporation

360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527

Made in China



Scan de code om de
handleiding in meer talen te krijgen

